

BORK

GLEД-МАСКА D800

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете  на bork.ru и вы получите быстрый доступ к рецептам, инструкциям, аксессуарам, запчастям и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.



LED-зона для лица


Накладки для защиты глаз

Пластины для гальванического массажа

LED-зона для подбородка

LED-зона для шеи


Зарядные контакты

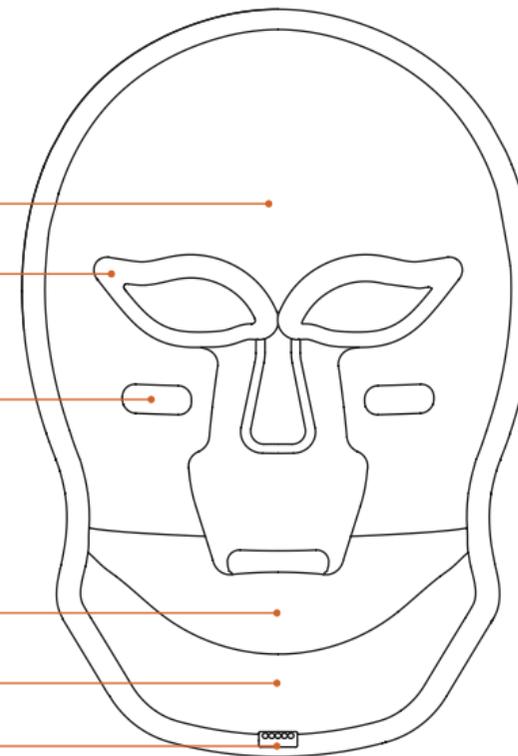

Индикатор заряда/ИК-датчик

Основной ремешок

Силиконовые фиксаторы

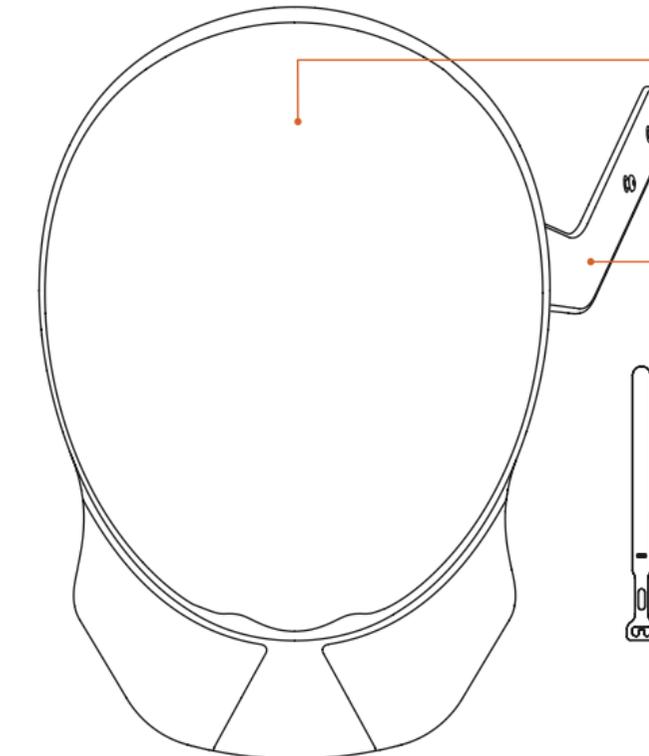



Световой индикатор

- Выбор режима
- Низкий уровень заряда

ИК-передатчик

Кнопка включения

Режим гальванического массажа/
голосовой помощник

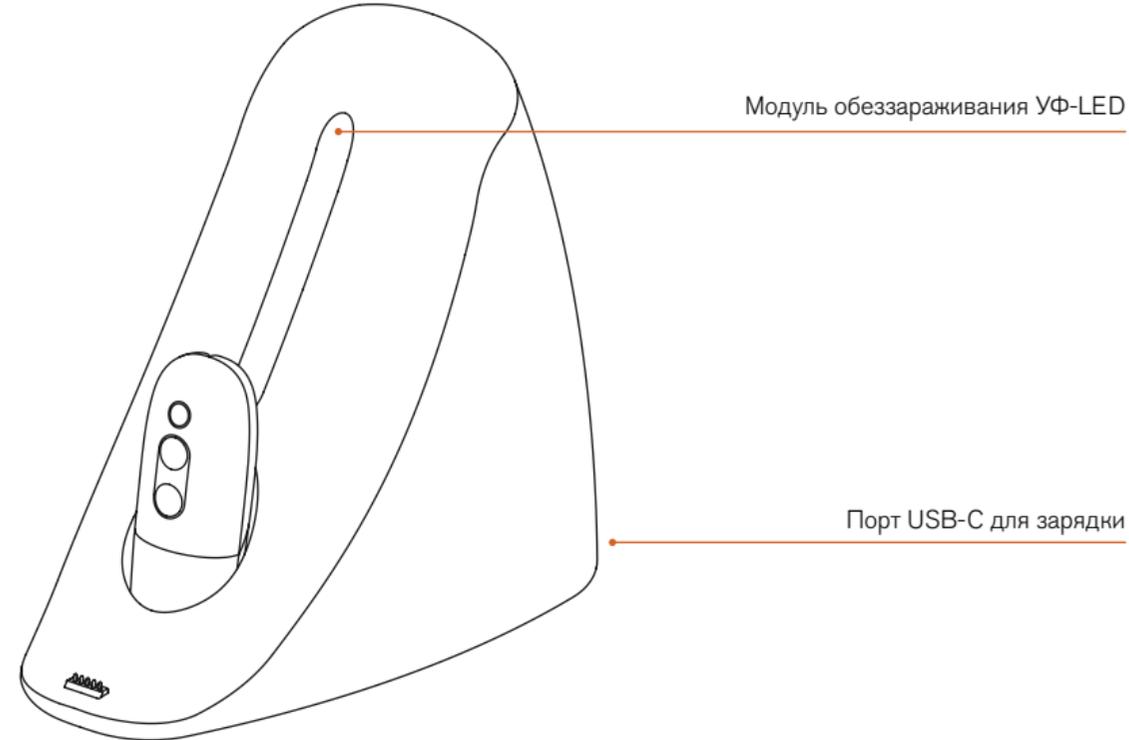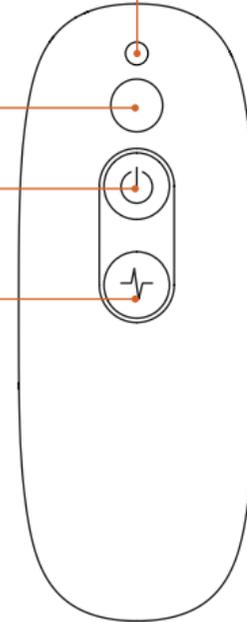

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя.
- Удалите и безопасно утилизируйте упаковочные материалы и этикетки с корпуса прибора.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Перед началом сеанса удостоверьтесь, что GLED-маска полностью заряжена.

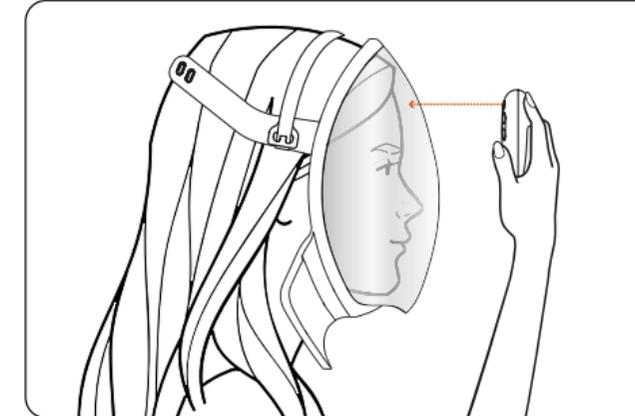

- Снимите маску с зарядной станции и наденьте на лицо так, чтобы область глаз попала в накладку для защиты.
- Закрепите основной ремешок так, чтобы вам было удобно (если маска сидит неустойчиво – используйте вспомогательные силиконовые фиксаторы).


- Чтобы начать сеанс в автоматическом режиме, расположите пульт, как показано на рисунке, и нажмите на кнопку
- Для переключения между режимами нажимайте на кнопку

После выбора желаемого режима сеанс начнется автоматически через 2 секунды. Голосовой ассистент оповестит вас об оставшемся времени до конца сеанса сначала за 5, а затем за 1 минуту.

- После завершения сеанса протрите маску сначала влажной, а затем сухой салфеткой.
- После этого установите пульт и маску на зарядную станцию для начала процедуры обеззараживания ультрафиолетом.

Для принудительного завершения сеанса нажмите и удерживайте кнопку 2 секунды.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

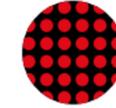


Режим повышения упругости кожи

Красные светодиоды + NIR
(15 мин)



Режим очищения кожи

Синие светодиоды + NIR/
розовые светодиоды (9 мин)

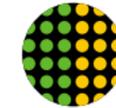

Режим осветления кожи

Зеленые светодиоды + NIR/
желтые светодиоды (9 мин)

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ МАССАЖ



Это метод введения косметических средств через кожу посредством постоянного маломощного тока.

Используйте режим гальванического массажа только при использовании специализированных гальванических масок BORK.

- Умойте лицо перед нанесением гальванической маски.
- Достаньте маску из упаковки и нанесите ее на лицо так, чтобы гальванический рисунок оказался на внешней стороне.
- Наденьте GLED-маску, выберите желаемый режим и отрегулируйте интенсивность гальванического массажа, используя кнопку . Гальванический массаж начнется автоматически через 2 секунды после выбора интенсивности. Голосовой ассистент оповестит вас об оставшемся времени до конца сеанса сначала за 5, а затем за 1 минуту.
- После завершения сеанса протрите маску сначала влажной, а затем сухой салфеткой.
- Установите пульт и маску на зарядную станцию для начала процедуры обеззараживания ультрафиолетом.

ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК

- Для переключения между режимами голосового помощника и звуковых сигналов нажмите и удерживайте кнопку  3 секунды.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Подключите USB-кабель к зарядной станции.
- Установите GLED-маску на зарядную станцию, чтобы контакты на маске и станции касались друг друга.

После установки GLED-маски на зарядную станцию начнется зарядка и автоматически включится режим обеззараживания ультрафиолетом.

Время до полной зарядки — 3 часа.
Количество сеансов на 1 заряде — до 6.

В маске установлен индикатор заряда батареи.

Индикация заряда	Уровень заряда
Синий	Идет зарядка
Красный	< 25%
Зеленый	100%

ХРАНЕНИЕ

Храните прибор в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30°C и относительной влажности воздуха не более 65%.

Оберегайте прибор от значительных перепадов температур.

При длительном хранении рекомендуется заряжать GLED-маску раз в месяц.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой выключите GLED-маску.
- Чтобы удалить загрязнения, протрите маску салфеткой или мягкой тканью, смоченной спиртом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор предназначен для домашнего использования.
- Перед каждым использованием проверяйте устройство на наличие неисправностей и повреждений.
- GLED-маска является продуктом личной гигиены и не заменяет рекомендаций врача.
- Не рекомендуется использовать прибор беременным женщинам, детям и людям преклонного возраста.

- Перед использование GLED-маски рекомендуется проконсультироваться с врачом: при наличии аллергии, кожных заболеваниях, тяжелой форме акне, ожогах; после лазерной коррекции зрения (LASIK, LASEK и т. д.); после любого хирургического вмешательства, пластических операций; людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями эндокринной системы; людям с психическим заболеваниями.
- Используйте GLED-маску с осторожностью, если вы перенесли инсульт, страдаете от гипертонии или гипотонии. Перед использованием прибора проконсультируйтесь с врачом.
- Не используйте GLED-маску, если страдаете отеками, воспалением или застоем крови в областях светового воздействия, при плохом физическом состоянии.

- Прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также недостаточным опытом и знаниями.
- Не допускайте попадания воды на поверхность или внутрь корпуса прибора.
- Не используйте прибор рядом с открытым источником тепла.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать или модифицировать прибор.
- Не используйте GLED-маску, натошак, после еды и энергичных упражнений.
- Прекратите использование GLED-маски, если почувствуете дискомфорт.
- Не используйте GLED-маску, если источник питания находится вне диапазона номинальной мощности прибора.

- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и передайте в ближайший сервисный центр компании BORK.
- Все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK.

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Решение
Устройство не включается	Низкий заряд батареи	Зарядите устройство
	Низкий заряд батареи пульта управления	Замените батарейки в пульте управления (AAA, 2 шт.)
Гальванический массаж не работает после выбора интенсивности массажа	Интенсивность выставлена на 0	Увеличьте интенсивность массажа
На устройство или внутрь его попала вода		Не пытайтесь включить устройство. Поместите GLED-маску в сухое место и оставьте сохнуть на 48 часов
Устройство не заряжается или заряжается медленно	Сетевой кабель плохо воткнут в зарядную станцию или в источник питания	Проверьте подключение сетевого кабеля к источнику питания и повторите процедуру зарядки
	В разьеме для зарядки есть посторонние элементы	Убедитесь, что в разьеме для зарядки отсутствуют посторонние элементы, и повторите процедуру зарядки
	Температура воздуха выше 30°C	Во избежание перегрева процедура зарядки будет проходить намного медленнее, чем при обычной комнатной температуре. Поместите устройство в место с температурой 5-30°C
Устройство сильно нагрелось	Продолжительное использование	Выключите устройство. Не используйте устройство чаще чем 2 сеанса подряд
Голосовой помощник не работает	Выбран режим звуковых сигналов	Нажмите и удерживайте кнопку гальванического массажа на 2 секунды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройство

Напряжение: 3,7 В

Емкость аккумулятора: 2500 мА·ч

Габариты (В × Ш × Г): 300 × 200 × 140 мм

Вес: 600 г

Зарядная станция

Напряжение на выходе: 5 В

Сила тока: 2 А

Габариты (В × Ш × Г): 205 × 135 × 250 мм

Сделано в Корее.

Информация о назначении изделия:

устройство предназначено для ухода за кожей лица и шеи.

Специальные условия реализации не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

GLEД-маска: 1 шт.

Пульт Д/У: 1 шт.

Зарядная станция: 1 шт.

Сетевой кабель: 1 шт.

Руководство пользователя

с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован.

Установленный производителем

в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ

«О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г.Москва, пос.Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104. Тел.: 8 800 500 88 99. Электронная почта: info@bork.ru.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Изделие GLED-МАСКА

Модель D800

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о продавце

.....
(наименование, юридический адрес)

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:
1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления;
последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

М. П.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом, под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- невалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;

- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Замена неисправных частей изделия (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Актуальные адреса и телефоны сервисных центров компании BORK в регионах РФ и странах СНГ представлены на сайте bork.ru. При возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

Фирменный сервисный центр компании BORK: ООО «Премиум Сервис».
Адрес: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 10. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.

