

**Лучший друг
твоей кожи!**



**Аппарат
для ультразвуковой
чистки лица KT-3120**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство аппарата для ультразвуковой чистки лица	5
Подготовка к работе и использование.....	8
Чистка и обслуживание	13
Уход и хранение	13
Устранение неполадок	14
Технические характеристики	16
Меры предосторожности.....	17

Общие сведения

Аппарат для ультразвуковой чистки лица КТ-3120 предназначен для удаления омертвевших клеток кожи, устранения жирного блеска и черных точек, способствует улучшению кровообращения и лимфодренажу.

Ультразвуковая чистка воздействует на кожу 3 способами:

- механический — звуковые волны создают давление на ткани, массируют их, усиливая проводимость клеточных структур;
- термический — тепло звуковых колебаний разогревает кожу на 1–2 °С, поры расширяются, кожа становится мягкой и податливой, улучшается кровообращение;
- физико-химический — во время процедуры на лицо наносится лечебный или косметологический гель или сыворотка. Воздействие ультразвука способствует их проникновению в слои кожи, таким образом, обменные процессы в клетках протекают быстрее.

Устройство работает в 4 режимах:

- очищение (высокочастотный ультразвук);
- лифтинг (низкочастотный ультразвук);
- ионофорез (ION+) (высокочастотный ультразвук);
- ионофорез (ION-) (высокочастотный ультразвук).

Похлопывающие движения лопатки в режиме «Лифтинг» создают эффект микромассажа, который улучшает тон кожи, упругость и разглаживает морщины.

Хромотерапия (синий свет) оказывает успокаивающее и противовоспалительное действие, обладает антибактериальными свойствами, помогает уменьшить раздражение кожи. Синий свет включается автоматически в режимах «Очищение», «Лифтинг», «Ионофорез (ION+)» и «Ионофорез (ION-)».

Использование аппарата для ультразвуковой чистки лица не уступает по эффективности профессиональным процедурам.

Комплексный подход позволяет максимально улучшить состояние кожи: очистить разные слои эпидермиса от загрязнений, а также нормализовать кровообращение и выровнять тон кожи.


Устройство имеет небольшие габариты: его удобно положить в сумку, взять с собой в путешествие.

Комплектация

1. Аппарат для ультразвуковой чистки лица — 1 шт.
2. Крышка — 1 шт.
3. Шнур Micro-USB — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство аппарата для ультразвуковой чистки лица

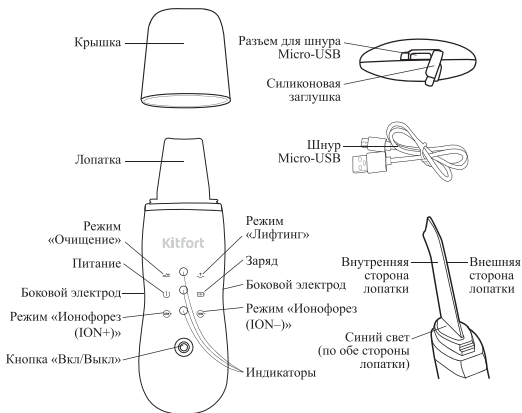



Включить, выключить и выбрать режим работы аппарата для ультразвуковой чистки лица можно при помощи **кнопки «Вкл/Выкл»**:

- одно нажатие — включение устройства в режиме ожидания;
- два нажатия — режим «Очищение»;
- три нажатия — режим «Лифтинг»;
- четыре нажатия — режим «Ионофорез (ION+)»;
- пять нажатий — режим «Ионофорез (ION-)»;
- шесть нажатий — режим ожидания.

Для отключения устройства удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд.

Нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» при включении устройства и при переключении режимов сопровождается коротким звуковым сигналом, а при выключении — длинным звуковым сигналом.

Индикаторы на передней части корпуса устройства информируют о режиме ожидания, о режиме работы, о состоянии заряда аккумулятора:

- три индикатора плавно мигают — режим ожидания;
- верхний и средний индикатор горят постоянно — режим «Очищение»;
- верхний индикатор мигает, средний индикатор горит непрерывно — режим «Лифтинг»;
- средний и нижний индикатор горят непрерывно — режим «Ионофорез (ION+)»;
- средний индикатор горит непрерывно, нижний индикатор мигает — режим «Ионофорез (ION-)».

Когда устройство находится на зарядке, средний индикатор непрерывно горит красным светом. Когда устройство полностью зарядится, средний индикатор будет гореть непрерывно зеленым светом.

Синий свет включается автоматически в режимах «Очищение», «Лифтинг», «Ионофорез (ION+)» и «Ионофорез (ION-)».

Режимы работы

Режим «Очищение» способствует:

- удалению загрязнений с поверхности кожи;
- устранению комедонов и загрязнений из пор;
- уменьшению размеров пор;
- улучшению тона кожи;
- выравниванию кожного рельефа.

Внимание! Перед использованием наносите на кожу специальный гель для проведения ультразвуковых процедур, пилинг-гель, тоник или просто смочите кожу водой.

Режим «Лифтинг» способствует:

- повышению тонуса и упругости кожи;
- уменьшению глубины морщин;
- улучшению тона кожи;
- уменьшению отечности.

Внимание! Перед использованием наносите на кожу специальный гель для проведения ультразвуковых процедур, крем, сыворотку или просто смочите кожу водой.

В режиме «Ионофорез (ION+)» положительно заряженные ионы способствуют:

- удалению загрязнений из глубоких слоев кожи, таких как комедоны (комедоны — пробки из смеси кожного сала и отшелушенного эпителия, которые закупоривают поры);
- расширению пор;
- разрыхлению и смягчению кожи;
- раскрытию кровеносных сосудов и усилению микроциркуляции крови;
- разрыхлению сальных пробок;
- усилению деятельности сальных и потовых желез.

Внимание! Перед использованием наносите на кожу специальный гель для проведения ультразвуковых процедур, сыворотку или просто смочите кожу водой.

Режим «Ионофорез (ION-)» способствует удалению мертвых клеток верхнего слоя кожи, глубокому увлажнению и питанию внутренних слоев кожи, благодаря воздействию отрицательно заряженных ионов. Воздействии отрицательных ионов способствует:

- закрытию пор;
- уплотнению кожи;
- сужению кровеносных сосудов;
- снятию отеков;
- снижению деятельности сальных и потовых желез.

Внимание! Перед использованием наносите на кожу специальный гель для проведения ультразвуковых процедур, сыворотку или просто смочите кожу водой.



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство и шнур Micro-USB из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство влажной, а затем сухой тканью. Тщательно продезинфицируйте лопаточку: ее можно протереть ватным спонжем, смоченным в 70% растворе спирта или хлоргексидине. Перед использованием зарядите аккумулятор устройства.

Зарядка аккумулятора

Если аккумулятор полностью разрядится, при включении аппарата для ультразвуковой чистки лица в режимах «Очищение», «Лифтинг», «Ионофорез (ION+)» и «Ионофорез (ION-)» после 10 секунд работы индикаторы погаснут, прозвучат 5 звуковых сигналов, и устройство выключится.

Отодвиньте силиконовую заглушку с нижней части корпуса устройства. Подключите шнур Micro-USB к разъему устройства, а затем к источнику питания.

Заряжайте устройство в течение 4 часов.

Во время зарядки средний индикатор непрерывно горит красным светом. При полной зарядке аккумулятора средний индикатор будет непрерывно гореть зеленым светом.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °C. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C.

Использование

1. Перед началом процедуры необходимо удалить загрязнения и макияж с кожи лица. При использовании аппарата для ультразвуковой чистки кожа лица должна быть влажной. В зависимости от выбранного режима нанесите на кожу гель, сыворотку или смочите кожу водой, чтобы лопатка лучше скользила и не повреждала кожу. Гель — это идеальный проводник для ультразвуковых волн.
2. Снимите крышку с устройства.
3. Возьмите устройство в руку, зажав боковые электроды, чтобы обеспечить оптимальное подведение ионов.


Примечание. Боковые электроды следует зажимать в режимах «Ионофорез (ION+)» и «Ионофорез (ION-)».

4. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». При включении устройства раздастся один звуковой сигнал. Устройство включится в режиме ожидания. Три индикатора на передней части корпуса устройства будут плавно мигать. Нажатие на кнопку при переключении режимов сопровождается одиноким звуковым сигналом. Выберите необходимый режим работы, нажав на кнопку «Вкл/Выкл»:
 - один раз — режим «Очищение»;
 - два раза — режим «Лифтинг»;
 - три раза — режим «Ионофорез (ION+)»;
 - четыре раза — режим «Ионофорез (ION-)»;
 - пять раз — режим ожидания.
5. Чтобы выключить устройство, необходимо нажать кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд. При выключении прозвучит длинный звуковой сигнал.

Примечание. Аппарат ультразвуковой чистки лица не обладает встроенной памятью. При повторном включении устройство перейдет в режим ожидания независимо от того, в каком режиме вы работали ранее.

Режим «Очищение»


1. Умойте лицо теплой водой. Удалите с кожи лица загрязнения и макияж.
2. Нанесите на кожу специальный гель для проведения ультразвуковых процедур, пилинг-гель, тоник или просто смочите кожу водой.
3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» 2 раза. Частота ультразвуковых колебаний — высокая.
4. Приложите устройство под углом 30–45° к коже лица внутренней стороной лопатки к коже лица. Слегка надавите на кожу и продвигайте устройство, как показано на рисунке, по зонам лица, нуждающимся в чистке, в течение 8,5 минут. Затем умойте лицо теплой водой.

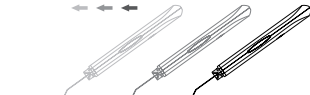




Режим «Лифтинг»

1. Умойте лицо теплой водой. Удалите с кожи лица загрязнения и макияж.
2. Нанесите на кожу специальный гель для проведения ультразвуковых процедур, крем, сыворотку или просто смочите кожу водой.
3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» 3 раза. Частота ультразвуковых колебаний — низкая.
4. Прислоните устройство под углом 30–45° к коже лица внешней стороной лопатки по направлению движения. Слегка надавите на кожу и продвигайте устройство, как показано на рисунке, по зонам лица, нуждающимся в уходе, в течение 8,5 минут. После процедуры умойте лицо теплой водой.

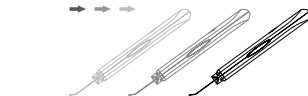


Режим «Ионофорез (ION+)»

1. Умойте лицо теплой водой. Удалите с кожи лица загрязнения и макияж.
2. Нанесите на кожу специальный гель для проведения ультразвуковых процедур, сыворотку или просто смочите кожу водой.
3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» 4 раза. Частота ультразвуковых колебаний — высокая.
4. Прислоните устройство под углом 30–45° к коже лица сначала внутренней, а затем внешней стороной лопатки по направлению движения. Слегка надавите на кожу и продвигайте устройство, как показано на рисунке, по зонам лица, нуждающимся в чистке, в течение 8,5 минут, меняя сторону лопатки. Затем умойте лицо теплой водой.

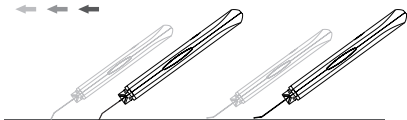

Режим «Ионофорез (ION-)»

1. Умойте лицо теплой водой. Удалите с кожи лица загрязнения и макияж.
2. Нанесите на кожу специальный гель для проведения ультразвуковых процедур, сыворотку или просто смочите кожу водой.
3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» 5 раз. Частота ультразвуковых колебаний — высокая.
4. Приложите устройство под углом 30–45° к коже лица внешней стороной лопатки к коже лица. Слегка надавите на кожу и продвигайте устройство, как показано на рисунке, по зонам лица, нуждающимся в чистке, в течение 8,5 минут, меняя сторону лопатки. Затем умойте лицо теплой водой.

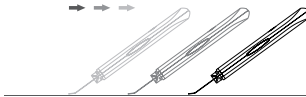

Советы

У устройства срабатывает автоотключение через 8,5 минут работы. При этом звучат 5 звуковых сигналов, и устройство выключается.

Держите устройство только сухими руками во избежание попадания влаги на кнопку «Вкл/Вкл», в корпус устройства, разъем шнура Micro-USB. Вода может попасть в корпус устройства и вывести его из строя.

Во время использования не задерживайтесь на одном участке лица, вы должны медленно продвигать лопатку по коже в направлении, как показано на рисунке.



Двигайтесь от шеи вверх по лицу, прорабатывая устройством обе стороны лица по горизонтали



Для очищения зоны вокруг носа используйте искривленный угол лопатки



Двигайтесь от шеи вверх по лицу, действуя прибором вертикально. Такое направление движений стимулирует естественный лимфатический дренаж организма



Используйте вырезанную среднюю часть лопатки, чтобы очистить область подбородка под нижней губой вертикальными короткими движениями

Если у вас на лице есть воспаление, нужно подождать, пока воспаление не исчезнет, и только потом пользоваться устройством.

Рекомендуется пользоваться устройством 2–3 раза в неделю. Не пользуйтесь устройством повторно в течение одного дня.

Перед использованием убедитесь, что лопатка и корпус устройства чистые.

Запрещается пользоваться устройством при следующих показаниях:

- онкологические заболевания кожи;
- имплантированный кардиостимулятор;
- нарушения целостности кожных покровов — раны, ссадины, трофические язвы, кровотечения;
- нарушения свертываемости крови;
- нарушения кожной чувствительности;
- наличие имплантов, располагающихся под кожей или в мышцах (не распространяется на зубные коронки, штифты и брекетсы);
- эпилепсия;
- тромбоз;
- беременность;
- выраженные формы купероза (например, сетка расширенных кровеносных сосудов на лице);
- индивидуальная непереносимость электрического тока.

Нельзя проводить процедуры с помощью аппарата на следующих зонах:

- глаза;
- область над сердцем и щитовидной железой;
- половые органы;
- над силиконовыми имплантатами;
- области с гелевой контурной пластикой.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус устройства сухой или влажной тканью.

Очищайте лопатку перед и после каждого использования: продезинфицируйте лопатку спонжем, смоченным в 70% растворе спирта или хлоргексидине. Не используйте для чистки лопатки жесткие моющие средства и абразивные ткани.

Уход и хранение

Храните аппарат для ультразвуковой чистки лица в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Храните устройство при температуре от 0 до 40 °С.

Аккумулятор аппарата для ультразвуковой чистки литий-ионный, поэтому при длительном хранении устройство лучше хранить наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Рекомендуем зарядить устройство в течение 2 часов. Таким образом, устройство будет заряжено примерно наполовину. При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятора может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания воды или других жидкостей в корпус устройства, в область кнопки «Вкл/Выкл», порт зарядки устройства и шнур Micro-USB.



Устранение неполадок

Аппарат для ультразвуковой чистки не включается, индикация не горит, нет ультразвуковой вибрации

Возможная причина	Решение
Аккумулятор устройства разряжен	Зарядите устройство в течение 4 часов

Аппарат для ультразвуковой чистки не заряжается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Слабый ток источника питания	Подключите устройство к другому источнику питания
Поврежден шнур Micro-USB	Обратитесь к производителю за новым шнуром Micro-USB или приобретите такой же шнур
Компьютер или пауэрбанк выключены	Включите компьютер или пауэрбанк
Шнур Micro-USB неплотно вставлен в разъем компьютера или пауэрбанка	Проверьте соединение шнура Micro-USB с разъемом компьютера или пауэрбанка

Аппарат для ультразвуковой чистки перестал работать

Возможная причина	Решение
По истечении 8,5 минут использования сработало автоотключение устройства	Включите устройство, нажав на кнопку «Вкл/Выкл»

Нет ультразвуковой вибрации

Возможная причина	Решение
Вы слишком сильно давили на лопатку во время использования	Устройство вышло из строя. Обратитесь в сервисный центр для устранения неисправности

Лопатка нагревается во время использования

Возможная причина	Решение
Лопатка слегка нагревается из-за воздействия ультразвуковых колебаний	Это нормально и не является неисправностью

Неприятные ощущения во время процедуры

Возможная причина	Решение
Вы не смазали кожу гелем, сывороткой или не смочили кожу водой	Перед проведением процедуры наносите на кожу гель, сыворотку или смочите кожу лица водой

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.



Технические характеристики

1. Питание: Micro-USB \approx 5 В, 1 А
2. Мощность: 2 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 0,6 А*ч (2,22 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Частота ультразвуковых колебаний: 24000 Гц \pm 13%
6. Уровень шума: \leq 57 дБ
7. Длина волны синего света: 465 нм \pm 1%
8. Время зарядки: 4 ч
9. Время работы от аккумулятора: около 80 мин
10. Количество режимов работы: 4
11. Автоотключение: через 8,5 мин
12. Длина шнура Micro-USB: 0,5 м
13. Размер устройства: 55 \times 16 \times 170 мм
14. Размер упаковки: 96 \times 207 \times 48 мм
15. Вес нетто: 0,10 кг
16. Вес брутто: 0,22 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Пефэкт Айдиа Текнолэджи Ко., Лтд. Билдинг 1, Фухуа Индастриэл Парк, Танвэй, Фуюн, Баоань, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей

Аппарат для ультразвуковой чистки лица КТ-3120

среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания воды внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура Micro-USB, на шнур Micro-USB и кнопку «Вкл/Выкл» не считается гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте аппарат для ультразвуковой чистки лица только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Запрещается пользоваться аппаратом для ультразвуковой чистки лица при следующих показаниях:
 - онкологические заболевания кожи;
 - имплантированный кардиостимулятор;
 - нарушения целостности кожных покровов — раны, ссадины, трофические язвы, кровотечения;



- нарушения свертываемости крови;
 - нарушения кожной чувствительности;
 - наличие имплантов, располагающихся под кожей или в мышцах (не распространяется на зубные коронки, штифты и брекеты);
 - эпилепсия;
 - тромбофлебит;
 - беременность;
 - выраженные формы купероза (например, сетка расширенных красных сосудов на лице);
 - индивидуальная непереносимость электрического тока.
4. Нельзя проводить процедуры с помощью аппарата на следующих зонах:
 - глаза;
 - область над сердцем и щитовидной железой;
 - половые органы;
 - над силиконовыми имплантатами;
 - области с гелевой контурной пластикой.
 5. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
 6. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
 7. Не заряжайте устройство, если шнур Micro-USB поврежден. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
 8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться аппаратом для ультразвуковой чистки лица только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
 9. Контролируйте работу аппарата для ультразвуковой чистки лица, когда рядом находятся дети или домашние животные.

**Аппарат для ультразвуковой
чистки лица КТ-3120**

10. Не оставляйте работающий аппарат для ультразвуковой чистки лица без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Держите прибор только сухими руками.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура Micro-USB, на шнур Micro-USB и на кнопку «Вкл/Выкл».
17. При повреждении шнура Micro-USB его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

IM-1



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87