

BORK

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИБОР F704
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Мобильное приложение BORK

Зарегистрируйте технику в мобильном приложении. Вы получите быстрый доступ к инструкциям, аксессуарам, напоминаниям о необходимости замены расходных материалов, а также к рецептам, новинкам и эксклюзивным коллекциям.



Индикационный дисплей

Контактная область

Регуляция интенсивности

Кнопка включения

Динамик
голосового ассистента


Зарядное отверстие



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед использованием прибора проконсультируйтесь с врачом или косметологом и пройдите тест на восприимчивость кожи.
- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя.
- Удалите и безопасно утилизируйте упаковочные материалы и защитные пленки с корпуса прибора.
- Зарядите прибор на протяжении трех часов.

ТЕСТ НА ВОСПРИИМЧИВОСТЬ КОЖИ

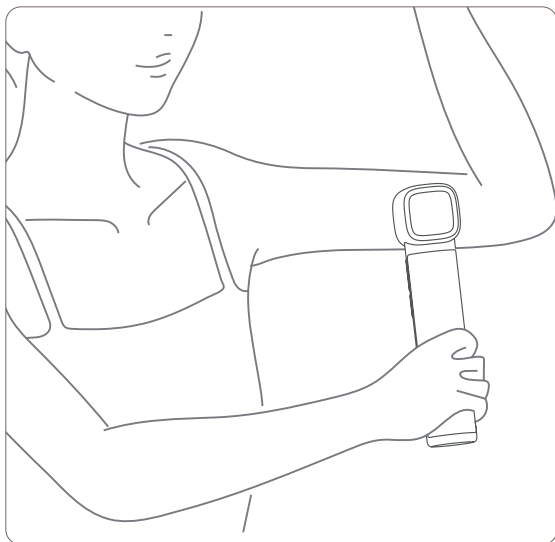

Перед первым использованием прибора протестируйте воздействие на руке:

- Очистите кожу внутренней стороны предплечья и нанесите контактный гель-тестер.
- Переведите устройство в режим лифтинга и используйте на минимальной мощности в течение 2 минут.

Если в течение 24 часов не возникнет побочных эффектов, перейдите к использованию прибора. Если на коже возникнут покраснения или дискомфортные ощущения — немедленно прекратите использование прибора и обратитесь в службу поддержки.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказанием к использованию прибора являются: эпилепсия, сердечно-сосудистые и аутоиммунные заболевания, травмы, инфекционные и кожные заболевания, аллергия, сыпь, воспаления, высокое кровяное давление или заболевание крови, лихорадка, сенсорные нарушения из-за тяжелой дисфункции периферической системы кровообращения, диабет, также прибор не рекомендуется использовать детям и подросткам до достижения совершеннолетнего возраста.

Прибор запрещено использовать в зоне слизистых, в зоне век, родинках, местах внутренних кровотечений, отеков и в зонах, поврежденных какими-либо косметическими или медицинскими процедурами.

Не используйте прибор в течение 2 недель после косметических медицинских процедур, в том числе после инъекций гиалуроновой кислоты, инъекции силикона, ботокс, нитевые лифтинги, пластика двойного века, HIFU, реконструктивной, косметической и пластической хирургии и т.д.

Не используйте устройство совместно с любым медицинским электронным оборудованием, включая: кардиостимуляторы, имплантированные электронные медицинские устройства, аппараты искусственного дыхания, электрокардиографы или другие электронные медицинские устройства.

Незамедлительно прекратите использование прибора, если во время процедуры вы почувствуете боль, жжение или любые другие болезненные ощущения.

УРОВНИ ИНТЕНСИВНОСТИ

Прибор имеет 3 уровня интенсивности.

Начинайте использовать прибор на минимальной мощности.

Даже если вы не чувствуете стимуляции, изменяйте уровень интенсивности постепенно. Уровни интенсивности 1–2 рекомендуется использовать пользователям с чувствительной или неподготовленной кожей.

Выбирайте уровень интенсивности в зависимости от зоны проработки и ваших ощущений. Начинающим пользователям рекомендуется выбирать минимальный уровень интенсивности.

Третий уровень интенсивности подойдет для опытных пользователей, а также для более тщательной проработки каждой зоны.

Не используйте прибор на одном и том же участке более 3 минут. Сильное нажатие на устройство или интенсивное воздействие на один участок может привести к повреждению кожных покровов. Прибор не рекомендуется использовать чаще 3 раз в неделю.

ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °С и относительной влажности не более 65%. Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Устройство имеет два режима работы: омоложение и лифтинг.

Режим омоложения предназначен для разглаживания морщин при помощи воздействия радиоволн.

Режим лифтинга предназначен для подтяжки кожи при помощи микротоков.

Каждая процедура состоит из двух этапов и предполагает использование режима омоложения на первом этапе и режима лифтинга на втором.

Режим	Омоложение	Лифтинг
Использование	С маской	С гелем
Время процедуры	10 мин	5 мин
Частота процедур	2-3 раза в неделю	

ОМОЛОЖЕНИЕ



- Перед началом процедуры очистите лицо водой или влажной салфеткой.
- Нанесите на лицо маску разметкой наружу.
- Переведите устройство в режим омоложения и выберите комфортный уровень интенсивности.
- Поднесите устройство вплотную к маске и удерживайте до появления подсказки «Перейдите к следующей ячейке». Перемещайте устройство вдоль каждого из 8 рядов. По завершении каждого ряда перейдите на следующий.
- По завершении процедуры снимите и утилизируйте маску.

ЛИФТИНГ


- Нанесите достаточное количество геля на лицо.
- Переведите устройство в режим лифтинга и выберите комфортный уровень интенсивности.
- Поднесите устройство вплотную к рабочей зоне и перемещайте согласно схемам. По истечении 2 минут прибор подскажет перейти к другой стороне лица или области лба.
- По завершении процедуры очистите лицо водой. Протрите устройство влажной салфеткой.



Линия 1: Подбородок — мочка уха.

Линия 2: Уголок губ — средняя часть уха

Линия 3: Область носа — верхняя часть уха.

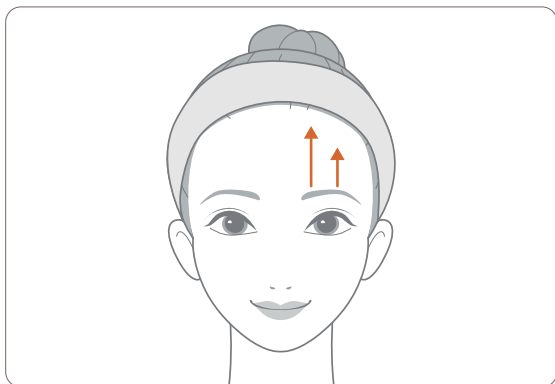

- Поднесите прибор вплотную к коже.
- Перемещайте скользящими вертикальными движениями снизу вверх по всей ширине области лба.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Не используйте устройство, если адаптер переменного тока поврежден.
- Всегда используйте оригинальный адаптер.
- Не допускайте контакта прибора с другим косметическим или электронным устройством при включенном питании.
- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключая и извлекая устройство из сети питания, не тяните за шнур, беритесь только за вилку.
- Не используйте, не храните и не заряжайте устройство в следующих местах: в ванных комнатах или вблизи ванн, душевых кабин, умывальников или других емкостей, наполненных водой; в местах, где присутствуют сильные радиоволны или магнетизм; вблизи легковоспламеняющихся веществ; вблизи нагревательных приборов;
- Не используйте устройство одновременно с другими электронными приборами.
- После использования устройства, а также при его чистке, извлекайте вилку из розетки.
- После завершения зарядки отсоедините сетевой адаптер от розетки.
- Прибор не является водонепроницаемым.
- Если капли воды попали на основной блок или зарядный терминал, немедленно и тщательно вытрите их. Хранение или зарядка устройства во влажном состоянии может привести к его неисправности.

- Несоблюдение этих требований может привести к пожару, поражению электрическим током, несчастным случаям, травмам и неправильной работе устройства.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и прибор на предмет повреждений.
- При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование устройства и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- Не протирайте устройство растворителями и спиртосодержащими жидкостями. Несоблюдение этого требования может привести к неисправности прибора.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном вертикальном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK.
- Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 5 В \approx 2 А

Мощность: 10 Вт

Емкость аккумулятора: 2600 мА·ч

Время зарядки: 3 часа

Габариты (В × Ш × Г): 177 × 52 × 34 мм

Масса: 285 г

Информация о назначении изделия: прибор предназначен для борьбы с возрастными изменениями кожи, устранения дряблости, отеками, морщин и повышения упругости.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор: 1 шт.

Подставка: 1 шт.

Зарядный провод: 1 шт.

Гель-тестер: 1 шт.

Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ

«О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104. Тел.: 8 800 500 88 99. Электронная почта: info@bork.ru.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Изделие КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИБОР

Модель ..F7O4

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о продавце

(наименование, юридический адрес)

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер. Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

М. П.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом, под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия. Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:
- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;

- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Замена неисправных частей изделия (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Актуальные адреса и телефоны сервисных центров компании BORK в регионах РФ и странах СНГ представлены на сайте bork.ru. При возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

Фирменный сервисный центр компании BORK: ООО «Премиум Сервис».

Адрес: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 10.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.

