

**BRADEx™**  
Health & Beauty

**ДАРСОНВАЛЬ**  
**ИМПУЛЬСНЫЙ МАССАЖЕР**  
для лица, тела и волос с 4 насадками с аргоном  
**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Дату производства смотрите на упаковке.  
Срок эксплуатации: 1 год.  
Гарантийный срок: 1 год.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.  
Транс East Metal Ltd, POB 9101, Наха 31091, Израил.  
Тел: +972-4-8521024. Факс: +972-3-7256059.  
www.bradex.co.il

Страна происхождения: Китай

Итогоverted:  
Дивизион Нью Вижн Импорт ив Экспорт Коштанг Лимитед.  
Адрес: Синьцзынь Роуд, 5, Индустриальная зона Байтанг, город Нинбо,  
КНР, 315708. тел:+86-574-6560937, факс:+86-574-6560938  
e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Импортер на территории РФ: ООО "Технологии здоровья", Российская  
Федерация, 117406, Москва, ул. Воровского, д.145, корп. 8,  
Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-24-66, www.bradex.ru



Импортер на территории  
Республики Беларусь: ООО «BRADEX»,  
220019, г. Минск, ул. Монтанжикова, д.9 комн. 34/4, УНП  
192409754. Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Международная торговая марка «BRADEX», Рег.№ 1419183

Израиль - Рег. № 204012

Россия – Рег. № 444287, № 683532

Дарсонваль импульсный массажер для лица, тела и волос  
с 4 насадками с Аргоном, белый

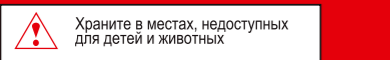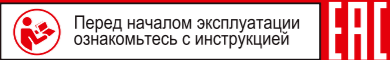


**ПРОФИЛАКТИКА НЕВРОЗОВ, РАСТРОЙСТВ СНА**  
Данная процедура должна быть назначена и проведена только при согласовании с лечащим врачом.  
**Техника выполнения:** Процедура выполняется плавными движениями от области затылка по задней поверхности шеи к плечам с использованием насадка-электрод эллиптической формы и контактным воздействием на низкую интенсивности в течение 5-10 минут. Рекомендуется проводить процедуру ежедневно или через день. Курс составляет от 10 до 15 процедур.



**ПРОФИЛАКТИКА НЕВРАЛГИИ**  
Для безопасного и эффективного воздействия на болевые зоны, такие как невралгии, невриты и радикулит, рекомендуется предварительная консультация с врачом.  
**Техника выполнения:** Для выполнения процедуры используется насадка-электрод эллиптической формы, которая обеспечивает бесконтактное использование и среднюю интенсивность воздействия в течение 10 минут. Курс лечения состоит из 10-15 процедур.



Для лечения остеохондроза позвоночника применяется контактная методика в лобильном режиме. Электрод перемещается справа и слева вдоль позвоночника от крестца до шеи. Длительность воздействия - 6-8 минут, общее количество процедур - 10-15.

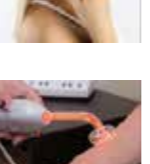

**ГОЛОВНЫЕ БОЛИ**  
Для лечения головных болей, связанных с такими заболеваниями, как вегетососудистая дистония и мигрени, применяется контактная методика в лобильном режиме. Перед началом процедуры необходимо удалить из волос заколки и другие металлические предметы, а также расчесать волосы. Во время процедуры электрод медленно перемещается от лба к затылку, постепенно усиливая интенсивность воздействия, пока не появится ощущение слабого покалывания. Длительность воздействия составляет 7-10 минут, проводится ежедневно или через день, общее количество процедур - 20-25.




**МАССАЖ РУК**  
Процедура ручного массажа проводится с использованием электрода "грибок" по контактной методике. Близ воздушного зозора, средней интенсивности. Массаж выполняется плавными круговыми движениями по спирали от пальцев до области лпеча.




**МАССАЖ ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ И ШЕИ**  
Для достижения эффекта приятного тепла во время процедуры используется электрод "грибок" в режиме "тихого розряда" с низкой интенсивностью. Массажные движения направлены от области затылка по задней поверхности шеи к плечам. Рекомендуется проводить процедуры ежедневно или через день, с продолжительностью воздействия 5-10 минут. Курс составляет 10-15 процедур.




**ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ**  
Для терапии заболеваний глотки, гортани, миндалин (фарингит, тонзиллит, ангина, ларингит) используется контактная методика лобильном режиме. Электрод перемещается по передней поверхности от области затылка по задней поверхности шеи к плечам с использованием насадка-электрод эллиптической формы и контактным воздействием на низкую интенсивности в течение 5-10 минут. Курс: 10 процедур.

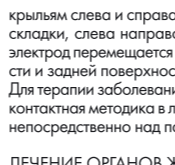

Для профилактики и лечения бронхита и трахеита используется контактная методика в лобильном режиме. Процедура начинается с обработки области носа: электрод перемещается от передней поверхности носа к области лба, слева направо и наоборот, в течение 3-5 минут. Далее проводится обработка шеи, где электрод перемещается линейными движениями вниз и вверх в течение 5 минут на передней поверхности и задней поверхности. Рекомендуется войти курс из 8-10 процедур.

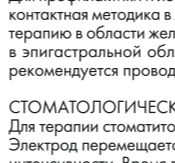


**Лечение органов ЖКТ**  
Для профилактики и лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта эффективно применяется контактная методика в лобильном режиме. При хроническом гастрите рекомендуется проводить терапию в области желудка, перемещая электрод продольными и круговыми движениями по коже в эпигастриальной области. Продолжительность процедуры составляет 7-10 минут, которые рекомендуется проводить ежедневно или через день. Курс лечения включает 15-20 процедур.

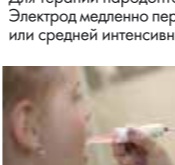


**СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ**  
Для терапии стоматитов используется контактная методика в лобильном режиме. Электрод перемещается круговыми движениями по большому. Процедура проводится при низкой интенсивности. Время воздействия: 5 минут. Курс: 10 процедур.




**ЛЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ**  
Для лечения миокардиодистрофии рекомендуется использовать воздействие средней интенсивности в области сердца. Продолжительность процедуры составляет 4-8 минут, проводится ежедневно, а курс лечения составляет 15-20 процедур.

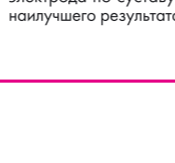


**ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА**  
Для лечения полиартрита и артрита эффективно применять контактную методика в лобильном режиме на область пораженных суставов. Данный метод включает плавное перемещение электрода по суставу, используя продольные и круговые движения. Это позволяет достичь наилучшего результата в терапии данных заболеваний.

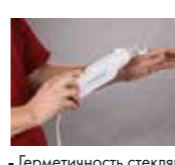


**ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ ПРИБОРА И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ:**  
1. Неисправности. Прибор не работает.  
Возможные причины:  
- Не подключен к сети;  
- Регулятор интенсивности выключен;  
- Герметичность стеклянного электрода нарушена;  
- Прибор неисправен.

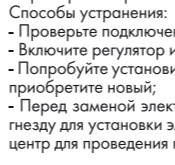


2. Неисправности: Воздействие аппарата стало слабее, разряд более «калоный».

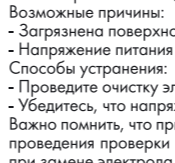


3. Загрязнена поверхность стеклянного электрода;  
4. Напряжение питания отличается от необходимого значения 220 В, 50 Гц.  
Способы устранения:  
- Проведите очистку электрода.

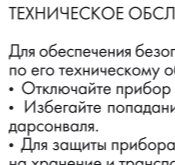


5. Убедитесь, что напряжение питания соответствует необходимому значению. Важно помнить, что при любых неисправностях необходимо обращаться в сервисный центр для проведения проверки и ремонта прибора. Также следует соблюдать меры предосторожности при замене электрода и работе с прибором.

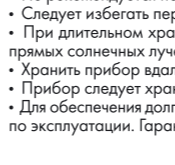


**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:**  
Для обеспечения безопасной и долговечной работы прибора необходимо соблюдать ряд правил по его техническому обслуживанию и хранению.  
- Отключайте прибор из электросети, если он не используется.  
- Избегайте попадания воды и других жидкостей в устройство, чтобы избежать повреждения дорсонвала.  
- Для защиты прибора и стеклянных электродов от ударов следует обращать особое внимание на хранение и транспортировку.  
- Не рекомендуется поднимать и тянуть прибор за шнур.  
- Следует избегать перемещения шнура тяжелыми предметами.  
- При длительном хранении прибора рекомендуется выбрать чистое и сухое место, избегая прямых солнечных лучей.  
- Хранить прибор вдали от источников открытого огня и разогретых поверхностей.  
- Прибор следует хранить в недоступном для детей месте.  
- Для обеспечения долгой и бесперебойной работы прибора необходимо соблюдать инструкцию по эксплуатации. Гарантия на прибор действует только при условии соблюдения этих правил.

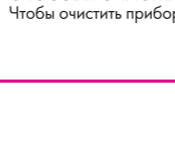


**СПОСОБЫ ОЧИСТКИ:**  
Чтобы очистить прибор, необходимо отключить его от электросети.

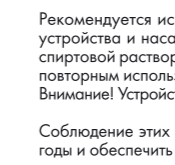


Рекомендуется использовать мягкую, слегка увлажненную хлопковую ткань для протирки устройства и насадка-электрода. Можно использовать нейтральное моющее средство или спиртовой раствор. После очистки прибора необходимо дать ему полностью высохнуть перед повторным использованием.

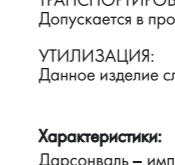

**ТРАНСПОРТИРОВКА:**  
Допускается в производственной упаковке.

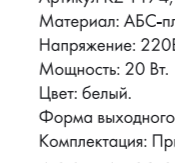

**УТИЛИЗАЦИЯ:**  
Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

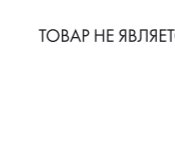

**Характеристики:**  
Дарсонваль – импульсный массажер для лица, тела и волос с 4 насадками с аргоном  
Артикул KZ 1174, белый  
Материал: АБС-пластик, стекло.  
Напряжение: 220В, 50/60 Гц  
Мощность: 20 Вт.  
Цвет: белый.



Форма выданного сигнала: импульсный с высокочастотным наполнением.  
Комплектация: Прибор – 1 шт., стеклянная насадка-электрод – 4 шт., инструкция по эксплуатации.



**ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.**



KZ 0568  
**МАССАЖЁР ДЛЯ ТЕЛА, ВРАДЕХ, БЕСПРОВОДНОЙ, ТАЙ ЧИ И ШИАЦУ МАССАЖ, 8 НАСАДКО**



KZ 1422  
**МАССАЖЕР ВИБРАЦИОННЫЙ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА DAY JOY**



KZ 1166  
**МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ КОМПРЕССИОННЫЙ ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ**



**Дарсонваль** – импульсный массажер для лица, тела и волос с 4 насадками с аргоном – это прибор, который используется для лечения различных проблем кожи, волос и сосудов. Работает по принципу высокочастотного электрического разряда, который проходит через газовый разрядник (аргоновый электрод).

Дарсонваль помогает улучшить кровообращение и стимулировать метаболизм клеток. Он также может помочь в борьбе с проблемами кожи, такими как акне, угревая сыпь, розacea, пигментация и т. д. Дарсонваль с аргоном способствует уменьшению воспаления, ускоряет заживление ран и улучшает цвет кожи.

Кроме того, массажер может помочь в решении проблем с волосами. Он улучшает кровообращение и стимулирует рост волос, а также делает волосы более здоровыми и блестящими. Воздействие дарсонвала на сосуды основано на том, что высокочастотный электрический разряд способен укрепить стенки кровеносных сосудов и повысить их тонус. Это может помочь уменьшить видимость сосудистых сеток и купероза на коже.

Необходимо помнить, что дарсонваль не является универсальным средством и не решает всех проблем с кожей, волосами и сосудами. Его применение может требовать определенных знаний и опыта, поэтому перед использованием необходимо обратиться к специалисту. В комплект с дарсонвалем входит встроенный стабилизатор напряжения и 4 вида насадок - электродов: универсальная насадка-грибок, точечная насадка-капелька, насадка-пестик и насадка-расческа.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**  
Импульсный массажер для дарсонвализации  
Уход за лицом, телом и волосами  
4 насадки-электрода с аргоном  
Работа от сети.  
Встроенный стабилизатор напряжения  
Компактный эргономичный дизайн

**ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАССАЖЕРА:**

- Технические характеристики прибора должны соответствовать напряжению электросети, к которой он подсоединен.
- Перед использованием аппарата нельзя наносить на кожу спиртовой раствор или спиртосодержащие косметические средства.
- Нельзя отключать аппарат путем выдергивания шнура из розетки без предварительного нажатия на кнопку включения/выключения прибора.
- Во избежание повреждения устройства, запрещена его эксплуатация в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная комната и бассейн.
- Перед включением аппарата в сеть, необходимо убедиться в отсутствии поврежденных стеклянных электродов, корпуса аппарата и изоляции сетевого шнура. Если обнаружены повреждения, дальнейшая эксплуатация аппарата запрещается.
- При перемещении аппарата из холодильного помещения в теплое, его эксплуатацию можно начинать не ранее, чем через 1 час. Также, после каждой 20 минут непрерывного использования, необходимо выключать аппарат на время не менее 15 минут, для охлаждения.
- Категорически запрещается эксплуатировать аппарат при попадании на его корпус воды или других жидкостей. В случае попадания жидкости на корпус аппарата, необходимо аккуратно удалить ее салфеткой. Если жидкость попала внутрь корпуса, эксплуатация аппарата запрещена, и необходимо обратиться в сервисный центр для проведения проверки и ремонта.
- Включенный аппарат необходимо держать в недоступном для детей месте.

При необходимости проведения процедур для детей, их должен проводить взрослый человек после консультации с врачом.

- Не рекомендуется хранение аппарата под прямыми солнечными лучами, в месте с повышенной температурой или влажностью.
- Запрещается касаться включенного аппарата и поверхности электродов в области гнезда с металлическим держателем на корпусе аппарата. Во время работы прибора запрещается касаться его поверхности и поверхности электродов за место в непосредственной близости от гнезда с металлическим держателем. Нарушение данного требования может привести к поражению электрическим током!
- В целях безопасности, следует оберегать аппарат и особенно стеклянные электроды от ударов.
- Нельзя использовать устройство в непосредственной близости от источника тепла.
- Запрещено использовать устройство совместно с электромагнитным оборудованием, электронными системами жизнеобеспечения, так как дарсонваль может стать причиной нарушения в работе медицинского оборудования.
- Аппарат вынужден высокое напряжение. Во включенном состоянии запрещается касаться аппарата и поверхности электродов в непосредственной близости (ближе 25 см) от гнезда для электродов.

**ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ**

Перед началом процедуры необходимо снять все металлические украшения и хорошо подготовить кожу. Она должна быть чистой и сухой. Пользоваться спиртосодержащими лосьонами во время процедуры нельзя.

Воздействие осуществляется спокойными плавными движениями по основным массажным линиям лица и тела.

Способы воздействия:

- Контактное (без воздушного зозора между электродом и кожей) сопровождается приятным теплом.
- Бесконтактное (дистанционное) [сть воздушный зазор 1-4 мм между электродом и кожей] сопровождается покалыванием, тиким треском и осязтиым запахом озона. Иногда можно заметить голубые искровые разряды.

Для лучшего скольжения электрода по коже и для достижения максимального эффекта от процедуры, рекомендуется присыпать кожу тальком, детской присыпкой или пудрой. При воздействии на рану используйте прибор только через чистую сухую марлевую салфетку.

Процедуру рекомендуется начинать с небольшой интенсивности, постепенно наращивая до необходимого уровня.

Стеклоный электрод необходимо мыть и стерилизовать после каждого использования.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:**

- Установите выбранную насадку-электрод аккуратно в гнездо до упора. Электрод легко устанавливается и вынимается.
- Перед подключением аппарата к сети убедитесь, что ручка регулятора интенсивности находится в положении OFF (ВЫКЛ.).
- Подключите массажер к сети и включите его, поворачивая ручку регулятора интенсивности по часовой стрелке до щелчка.

4. Аккуратно поднесите насадку-электрод к поверхности кожи и установите нужную силу воздействия, поворачивая ручку регулятора интенсивности по часовой стрелке. Максимальная интенсивность соответствует краткому прозвону положению ручки.

5. Если требуется замена насадки, выключите массажер, установите нужную насадку и продолжите процедуру. После смены насадки выключите аппарат, повернув ручку регулятора интенсивности в положение OFF (ВЫКЛ.) и отключите его от сети.

**РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

Рекомендации по применению прибора для дарсонвализации относятся к широкому спектру заболеваний кожи, головы и тела.

- Среди них: гнойнички, угревая сыпь, жирная себорея, акне, зрялая, дряблая, маршированная кожа с недостаточным тургором, бледная паристая кожа со сниженным питанием, псориаз, красный плоский лишай, экзема, зряпие, кожный зуд, в том числе аллергический, красный зернистый нос, келоиды, очаговая и системная склеродермия, герпетические высыпания, кеандице и послеоперационные рубцы, послеоперационные отеки и инфильтраты, нейродермиты и многие другие.

Прибор эффективен для укрепления волосных луковиц, стимуляции роста волос и борьбы с проблемами интенсивного выпадения волос, себорейного облысения и других видов оплешивения.

Также средство эффективно борется со всеми типами и стадиями целлюлита.

Прибор может использоваться для комплексной терапии неврозов, заболеваний суставов, носа, дыхательной системы, гинекологических и урологических проблем, а также для лечения длительно незаживающих ран.

Не забывайте, что перед использованием прибора необходимо получить консультацию у лечащего врача.

**Комплексная терапия:**

- Заболевания периферической нервной системы, в том числе и с болевым синдромом, неврозы: радикулит, невритомия, невралгии, остеохондроз позвоночника, климактерический невроз, мигрень, расстройство сна, миготания.
- Заболевания суставов: полиартрит, артрит, спондилоартроз.
- Урологиче: импотенция, недержание мочи, цистит, простатит.
- Заболевания дыхательной системы: бронхиты, трахеиты, бронхиальная астма.
- Заболеваний сухожильной системных сухож, мышц и апоневрозов: миалгии, миозит.
- Гинекологиче: кольпит, вагинизм, эрозия шейки, фритириоз, зуд, вульва, эндоцеривит, трещины сосков молочных желез.
- Урологиче: импотенция, недержание мочи, цистит, простатит.
- Заболевания носоглотки: фарингит, ларингит, паратонзиллит, тонзиллит.
- Заболевания носоглотки: фарингит, ларингит, паратонзиллит, тонзиллит.
- Заболевания носоглотки: фарингит, ларингит, паратонзиллит, тонзиллит.
- Заболевания носоглотки: фарингит, ларингит, паратонзиллит, тонзиллит.

Электрод-расческа – нормализация салыной секреции и общего состояния волос. Применяется для ухода за волосами и кожей головы. Она эффективно борется с проблемами выпадения волос (алопеции) и себореи, а также стимулирует волосные фолликулы и улучшает состояние волос.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Существует ряд медицинских состояний, при которых не рекомендуется использовать массажер.

- Среди них: сердечно-сосудистая недостаточность, аритмия, плохая свертываемость крови, кровотечения, тромбозы, купероз, туберкулез, онкология, высокая температура или лихорадка, а также избыточный рост волос на лице.

Нот стоит использовать массажер во время беременности.

Следует избегать использования массажера, если у человека имеются врожденные кардиостимуляторы, индивидуальные переносимость электрического тока или нарушения кожной чувствительности. Кроме того, не рекомендуется использовать устройство в состоянии алкогольного опьянения.

При выборе массажера необходимо учитывать состояние своего здоровья и проконсультироваться с врачом, во избежание возможных негативных последствий.

**ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.**

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Напомним, что при проведении домашней дарсонвализации в профилактических целях необходимо предварительно проконсультироваться с лечащим врачом. Здоровье и красота кожи – наша главная ценность!

Уникальная насадка-электрод эллиптической формы (ребельско) – идеальный помощник для проведения омолаживающих процедур. Предназначена для эффективных манипуляций по уходу за кожей лица и тела. Подходит для проведения лифтинга кожи, профилактики неврозов и расстройств сна. Благодаря своей форме, насадка позволяет регулировать площадь воздействия от точечного до более обширного, что делает ее универсальным инструментом для различных процедур.

Насадка-электрод для точечного воздействия (капелька) – прекрасно справляется с точечными воспалениями. Предназначена для профилактики местных высыпаний на коже и угрей. Она обладает самой высокой частотой тока, что позволяет эффективно бороться с проблемами кожи.

Универсальная насадка-электрод (грибок) – обладает мощным бактерицидным действием. Подходит для проведения дарсонвализации на более широких частях лица и тела, а также на руках, ногах, бедрах и ягодицах. Она идеально подходит для профилактики целлюлита, возмозного расширения вен, остеохондроза и длительно незаживающих ран.

Электрод-расческа – нормализация салыной секреции и общего состояния волос. Применяется для ухода за волосами и кожей головы. Она эффективно борется с проблемами выпадения волос (алопеции) и себореи, а также стимулирует волосные фолликулы и улучшает состояние волос.

**Внимание! Во всех случаях проведения домашней дарсонвализации в профилактических целях необходимо предварительно проконсультироваться с лечащим врачом.**

**ЛИФИТИНГ И ПИТАНИЕ КОЖИ ЛИЦА, ДЕКОЛЬТЕ**  
Тщательно очистите кожу с помощью молока или тоника. Для проблемной жирной кожи рекомендуется более глубокая очистка кожи скрабом.  
Удалите лишнюю влагу с кожи, подсушите ее салфеткой.  
Нанесите немного косметического талька или пудры для улучшения скольжения электрода.

**Техника выполнения:** Насадка-электрод эллиптической формы, контактное использование, средняя или средняя интенсивность, воздействие в течение 5-10 минут. Все движения выполняются медленными скользящими движениями по основным массажным линиям, направленными снизу-вверх:  
- от подбородка до мочки уха  
- от носа к вискам  
- от бровей вверх в волосистой части головы.  
В области шеи движение проводится также снизу вверх, не затрагивая область щитовидной железы.

**НОРМАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ**  
Тщательно очистите кожу с помощью скраба для жирной, проблемной кожи.  
Удалите лишнюю влагу с кожи, подсушите ее салфеткой.  
Нанесите немного косметического талька или пудры для улучшения скольжения электрода.

**Техника выполнения:** Насадка-электрод эллиптической формы, контактное использование, средняя или сильная интенсивность, воздействие в течение 5-10 минут. После процедуры можно нанести на зону воздействия питательный или увлажняющий крем.

**ПРОФИЛАКТИКА ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ**  
Тщательно очистите кожу, используя скраб для жирной, проблемной кожи.  
Удалите лишнюю влагу с кожи, подсушите ее салфеткой.  
Нанесите немного косметического талька в подсушивающими противовоспалительными компонентами для улучшения скольжения электрода.  
Воздействие осуществляется непосредственно на проблемную точку (акне, гнойничковая сыпь, воспаленные угнетения) и плавными движениями вокруг нее.

**Техника выполнения:**  
• Профилактика гнойных инфильтратов, угревой сыпи  
• Насадка-электрод для точечного воздействия, контактное использование, средняя интенсивность, воздействие в течение 5-10 минут.  
• Профилактика гнойничков.  
Насадка-электрод для точечного воздействия, бесконтактное использование (воздушным зором 1-4 мм), высокая интенсивность, воздействие в течение 5-10 минут.  
После процедуры можно нанести на зону воздействия увлажняющий или питательный крем/маску.  
Процедура проводится ежедневно или через день. Один курс включает в себя 10-20 процедур. Курс можно повторять 3-4 раза в год.

**СТИМУЛЯЦИЯ РОСТА ВОЛОС**  
Перед началом процедуры необходимо обеспечить чистоту и сухость волос. Рекомендуется удалить все заколки и тщательно расчесать волосы.

**Техника выполнения:** Процедура выполняется с помощью электрода-расчески, который плавно скользит по волосам от лба к затылку. В случае коротких волос допустимо движение в обратном направлении. Техника выполнения включает контактное использование электрода-расчески средней интенсивности в течение 10-15 минут. После процедуры рекомендуется нанести на волосы лечебную маску или сыворотку на кожу головы. Процедуры проводятся ежедневно, а один курс включает в себя 20-30 процедур. Курсы можно повторять 3-4 раза в год.

**ПРОФИЛАКТИКА ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН**  
Для профилактики и лечения варикозного расширения вен и болезни Рейно, используется контактная методика в лобильном режиме, направленная на область пораженных сосудов нижних конечностей.  
Для начала, нанесите на чистую кожу немного косметического талька, чтобы обеспечить лучшее скольжение насадки-электрода. Важно выполнять все движения медленно и плавно.

**Техника выполнения:** Для процедуры используйте универсальную насадку-электрод с контактным использованием и средней интенсивностью. Начинайте с области от пальцев стопы до пятки, проводя процедуру в течение 5-10 минут. Затем перейдите к области от локтя до подколенной ямки, проводя процедуру в течение 3-5 минут.  
Нанесите немного косметического талька или пудры для улучшения скольжения электрода.  
Далее, переместитесь к области от колена до паховой зоны, проводя процедуру в течение 5-10 минут. Наконец, проведите процедуру в области от подколенной ямки до подвздошной складки в течение 3-10 минут.  
После процедуры рекомендуется нанести на кожу крем, который поможет в профилактике варикозных вен. Процедуру необходимо проводить ежедневно или через день. Один курс состоит из 15 процедур.

**ПРОФИЛАКТИКА ЦЕЛЛЮЛИТА**  
Для достижения наилучшего эффекта, необходимо производить воздействие на чистую и сухую кожу (рекомендуется использовать косметический тальк).

**Техника выполнения:** Для этой процедуры необходимо универсальная насадка-электрод, которая обеспечит контактное использование, среднюю или сильную интенсивность и воздействие в течение 15 минут. После процедуры рекомендуется использовать антицеллюлитное средство, такое как крем или сыворотка, для усиления эффекта. Чтобы достичь максимального результата, рекомендуется проводить процедуры ежедневно или через день. Один курс состоит из 15 процедур.

**ПРОФИЛАКТИКА ЯЗВ ДОЛГО НЕЗАЖИВАЮЩИХ РАН**  
Процедуру необходимо проводить при смене повязки. Накройте поверхность раны или язвы чистой сухой марлевой салфеткой.  
**Техника выполнения:** для выполнения процедуры используется универсальная насадка-электрод с бесконтактным воздействием и средней интенсивностью воздействия в течение 10 минут. Движения выполняются по краю раны или язвы в радиусе 5-7 см. Курс лечения состоит из 10-15 процедур. После процедуры необходимо нанести рекомендованный врачом препарат.