

**Бережно
очищаю
кожу!**



**Аппарат для ультразвуковой
чистки лица КТ-3190**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство аппарата для ультразвуковой чистки лица	5
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка и обслуживание	12
Уход и хранение	12
Устранение неполадок	13
Технические характеристики.....	14
Меры предосторожности.....	15
Другие товары Kitfort	17

Общие сведения

Аппарат для ультразвуковой чистки лица КТ-3190 предназначен для удаления омертвевших клеток кожи, избытка кожного сала и черных точек, а также способствует улучшению кровообращения и лимфодренажу. Использование прибора способствует повышению эластичности кожи и увеличивает эффективность от применения питательных косметических средств. Ультразвуковая чистка также помогает сузить поры и выровнять цвет кожи.

Прибор воздействует на кожу с помощью ультразвуковых волн, благодаря чему минимизируется механическое воздействие на кожу, и, соответственно, нет нарушения целостности кожных покровов, уменьшается риск раздражения кожи. Ультразвуковая чистка является разновидностью пилинга, ее можно делать в любое время года, тогда как, например, у химического пилинга есть ограничения, связанные с гиперпигментацией в летнее время.

Ультразвуковую чистку лица обязательно проводят с использованием жидкой контактной среды, например, специальных гелей для ультразвуковой чистки. Когда ультразвуковая волна попадает в жидкую среду, происходит эффект кавитации: в жидкости создаются пузырьки, которые затем лопаются, благодаря чему загрязнения выбиваются с поверхности кожи.

Дополнительно у прибора есть функции воздействия на кожу положительными и отрицательными ионами. Воздействие положительными ионами способствует глубокой очистке и повышению эластичности кожи. Воздействие отрицательными ионами улучшает эффективность питания кожи уходовыми средствами и гидробаланс.

Устройство работает в 4 режимах:

- мягкое очищение;
- микромассаж;
- очищение;
- питание.

Режимы «Мягкое очищение» и «Очищение» отличаются тем, что во втором режиме прибор воздействует на кожу еще и положительно заряженными ионами. Использовать прибор в режиме «Мягкое очищение» вы можете 2–3 раза в неделю, так как данный режим более щадящий для кожи, но менее эффективный. Использовать прибор в режиме «Очищение» рекомендуется не чаще одного раза в неделю. В режиме «Микромассаж» прибор воздействует на кожу не только ультразвуковыми волнами, но и немного вибрирует, что обеспечивает лифтинг эффект и стимулирует обменные процессы в клетках кожи. Работа с прибором в режиме «Питание» увеличивает эффективность питательных косметических средств благодаря отрицательным ионам.

Регулярное использование аппарата для ультразвуковой чистки лица в совокупности с комплексным подходом к уходу за кожей позволяет улучшить состояние вашей кожи в домашних условиях. Однако помните, что эффект от использования аппарата заметен только при регулярном применении и с учетом соблюдения всех правил использования прибора и ухода за кожей.


В комплекте с устройством идет база для зарядки и шнур USB Type-C.

Внимание! Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.

Комплектация

1. Аппарат для ультразвуковой чистки лица — 1 шт.
 2. Крышка — 1 шт.
 3. База для зарядки — 1 шт.
 4. Шнур USB Type-C — 1 шт.
 5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 6. Коллекционный магнит — 1 шт.*
- *опционально

Устройство аппарата для ультразвуковой чистки лица

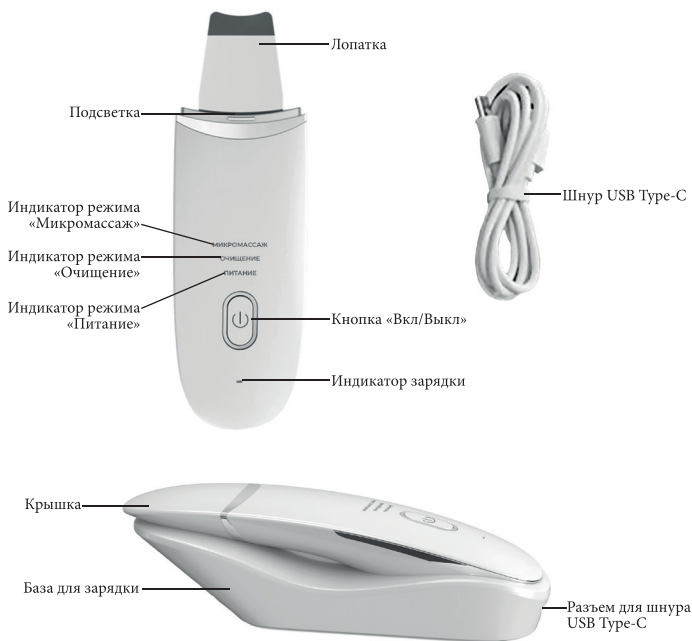



Включить, выключить прибор, а также выбрать режим работы аппарата для ультразвуковой чистки лица можно при помощи **кнопки «Вкл/Выкл»**. Чтобы включить прибор, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд. Прибор перейдет в режим ожидания, загорятся индикаторы всех режимов и индикатор зарядки, затем индикаторы режимов будут медленно мигать.

Режимы переключаются с помощью кнопки «Вкл/Выкл» следующим образом:

- первое нажатие — работа в режиме «Мягкое очищение», индикатор режима «Микромассаж» горит непрерывно, остальные индикаторы не горят;
- второе нажатие — работа в режиме «Микромассаж», индикатор режима «Микромассаж» мигает, остальные индикаторы не горят;
- третье нажатие — работа в режиме «Очищение», индикатор режима «Очищение» горит, остальные индикаторы не горят;
- четвертое нажатие — работа в режиме «Питание», индикатор режима «Питание» горит, остальные индикаторы не горят;
- пятое нажатие переводит прибор в режим ожидания.

Для отключения устройства удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд. Когда прибор работает (выбран один из режимов) горит **подсветка** около лопатки. Нажатие на кнопку сопровождается звуковым сигналом.

Прибор заряжается при установке на **базу для зарядки**. База для зарядки подключается к источнику питания с помощью **шнура USB Type-C** из комплекта.

Если прибор разряжен, индикатор зарядки загорится красным, затем прибор автоматически выключится. Во время зарядки индикатор зарядки мигает красным, когда прибор заряжен, индикатор зарядки горит красным непрерывно.

Прибор автоматически отключается через 8 минут непрерывной работы.

Режимы работы

Режимы «Мягкое очищение» и «Очищение» способствуют:

- удалению загрязнений с поверхности кожи;
- удалению омертвевших клеток кожи;
- устранению мелких комедонов и загрязнений из пор;
- удалению избытка кожного сала;
- улучшению тона кожи;
- выравниванию кожного рельефа.

Режимы «Мягкое очищение» и «Очищение» отличаются тем, что во втором режиме прибор воздействует на кожу еще и положительно заряженными ионами. Положительно заряженные ионы позволяют удалять более глубокие загрязнения. Использовать прибор в режиме «Мягкое очищение» вы можете 2–3 раза в неделю, так как данный режим более щадящий для кожи, но менее эффективный. Использовать прибор в режиме «Очищение» рекомендуется не чаще 1 раза в неделю.

Примечание. Прибор неэффективен для удаления больших и закрытых комедонов.

Режим «Микромассаж» способствует:

- повышению тонуса и упругости кожи;
- улучшению тона кожи;
- уменьшению отечности.

Режим «Питание» способствует:

- повышению эффективности уходовой косметики;
- улучшению гидробаланса кожи;
- улучшению тона кожи.

В режиме «Питание» прибор воздействует на кожу ультразвуковыми волнами и отрицательными ионами, которые способствуют лучшему проникновению питательных веществ в глубь кожи.

Внимание! Никогда не используйте прибор на сухой коже! Перед использованием наносите на кожу специальное средство для ультразвуковой очистки, гель или сыворотку.

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев прибором пользоваться запрещено, в том числе при беременности и при наличии имплантов. Не используйте прибор на участках кожи с воспалениями или акне. Тяжелая форма акне является противопоказанием к использованию прибора. При использовании прибора не проводите лопаткой по родинкам! Не используйте прибор на шее, ультразвуковые волны могут нанести вред щитовидной железе. Не используйте прибор на других частях тела. Если у вас есть пирсинг на лице, перед использованием аппарата снимите украшения.

В данной инструкции представлены усредненные рекомендации по частоте использования прибора. Настоятельно рекомендуется перед использованием прибора проконсультироваться с косметологом или дерматологом, чтобы узнать, как часто необходимо проводить процедуры с аппаратом для ультразвуковой чистки кожи в вашем случае. Возможность проведения других косметологических процедур до или после ультразвуковой чистки также согласовывайте с врачом.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство и аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство влажной, а затем сухой мягкой тканью. Тщательно продезинфицируйте лопатку: ее можно протереть ватным диском, смоченным в 70% растворе спирта или хлоргексидине. Не допускайте попадания воды в корпус устройства, на кнопку «Вкл/Выкл», базу для зарядки, контакты для зарядки на устройстве и на базе и в разъем для шнура USB Type-C. Перед использованием зарядите аккумулятор устройства.

Зарядка аккумулятора

Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, если он рассчитан на ток 2 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: =5 В, 2 А.

Прибор заряжается только при установке на базу для зарядки.

Установите прибор на базу для зарядки, вставьте шнур USB Type-C в разъем на базе и затем подключите его к источнику питания.



Если прибор разряжен, индикатор зарядки загорится красным, затем прибор автоматически выключится. Во время зарядки индикатор зарядки мигает красным, когда прибор заряжен, индикатор зарядки горит красным непрерывно.

Обычное время зарядки аккумулятора составляет 4 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем заряда. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Примечание. Во время зарядки прибор включить нельзя. Чтобы включить прибор, снимите его с базы для зарядки.

По окончании зарядки отсоедините шнур USB Type-C от источника питания, а затем от базы для зарядки.

От одной зарядки прибор работает 1 час.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если аппарат не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3 месяца, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите прибор, затем заряжайте примерно 2 часа. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Использование

1. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев прибором пользоваться запрещено, в том числе при беременности и при наличии имплантов. Не используйте прибор на участках кожи с воспалениями или акне. Тяжелая форма акне является противопоказанием к использованию прибора. При использовании прибора не проводите лопаткой по родинкам! Не используйте прибор на шее, ультразвуковые волны могут нанести вред щитовидной железе. Не используйте прибор на других частях тела. Если у вас есть пирсинг на лице, перед использованием аппарата снимите украшения.

Внимание! Держите устройство только сухими руками. Не допускайте попадания влаги и косметических средств в корпус устройства, на кнопку «Вкл/Выкл», базу для зарядки и в разъем для шнура USB Type-C.

Не рекомендуется использовать прибор в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате.

2. Перед началом процедуры обязательно очистите кожу и снимите макияж.
3. Для эффективного проведения процедуры рекомендуется размягчить кожу, используя гель для холодного гидрирования. Гель наносится плотным слоем на лицо, затем участки лица с гелем закрываются пленкой. Сколько времени держать гель на лице, уточняйте в рекомендациях к используемому средству. Не наносите гель и не закрывайте пленкой глаза и зону вокруг глаз, губы и носдри.
4. Снимите пленку и смойте гель с лица.

- Нанесите на кожу специальное средство для проведения ультразвуковой чистки (приобретается отдельно). Если планируете работать с прибором в режиме «Микромассаж», нанесите на кожу крем или сыворотку, чтобы лопатка лучше скользила и не повреждала кожу. Для использования прибора в режиме «Питание» нанесите на кожу питательный крем или другое уходовое средство для питания кожи. Не используйте прибор на сухой коже!


Примечание. Если используемое косметическое средство слишком густое, прибор может работать менее эффективно и движение лопатки по коже будет затруднено. Используйте менее густое средство.

- Снимите крышку с устройства.
- Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд. Прибор перейдет в режим ожидания, загорятся индикаторы всех режимов и индикатор зарядки, затем индикаторы режимов будут медленно мигать. Выберите один из четырех режимов работы с помощью кнопки «Вкл/Выкл».

Внимание! Если средство, по которому вы проводите процедуру, впиталось или высохло во время проведения процедуры, снова нанесите его на лицо. Не проводите чистку на сухой коже!


Не используйте прибор в зоне вокруг глаз.

- Для проведения регулярной очистки (2–3 раза в неделю) выберите режим «Мягкое очищение». Для проведения глубокой очистки выберите «Очищение» (рекомендуется использовать не чаще 1 раза в неделю). При использовании обоих режимов располагайте лопатку лицевой стороной к коже. Лицевая сторона лопатки — это противоположная сторона от кнопок. Прислоните лопатку к коже и проводите ей по массажным линиям так, чтобы лопатка двигалась вперед, а не назад. Держите прибор под углом 45° . Не давите на прибор сильно, чтобы не повредить кожу. При проведении ультразвуковой чистки нет необходимости надавливать на кожу лопаткой, так как очищение происходит за счет ультразвуковых волн. Рекомендуемое время проведения процедуры: 3–5 минут.

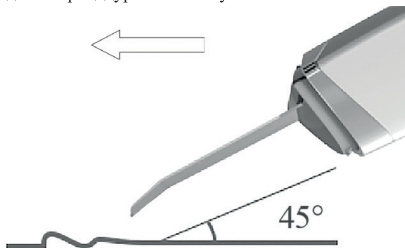

- Если вместо ультразвуковой чистки вы хотите сделать массаж, включите режим «Микромассаж». Проводите данную процедуру 2–3 раза в неделю. Для работы в данном режиме используйте крем или сыворотку. При работе в режиме «Микро-

массаж» располагайте лопатку лицевой стороной от кожи, чтобы к лицу прикасалась плоская часть лопатки. Проводите лопаткой по массажным линиям снизу вверх так, чтобы лопатка двигалась назад, а не вперед. Держите прибор под углом в 45° . Не давите на прибор сильно, чтобы не повредить кожу. Рекомендуемое время проведения процедуры 3–5 минут.

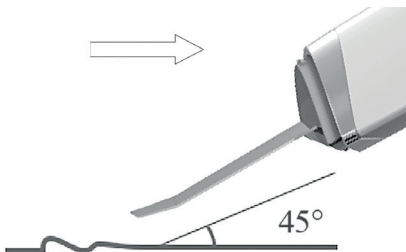

10. Один раз в неделю вы можете работать с прибором в режиме «Питание». Для работы в данном режиме используйте питательную сыворотку или другое уходовое средство. При работе в режиме «Питание» располагайте лопатку лицевой стороной от кожи, чтобы к лицу прикасалась плоская часть лопатки. Проводите лопаткой по массажным линиям так, чтобы лопатка двигалась назад, а не вперед. Держите прибор под углом в 45° . Не давите на прибор сильно, чтобы не повредить кожу. Рекомендуемое время проведения процедуры 3–5 минут.

11. Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд.

Примечание. Прибор автоматически отключается через 8 минут работы.

12. После проведения ультразвуковой чистки смойте с лица остатки средства для ультразвуковой чистки и загрязнения, которые могли остаться на поверхности кожи. После проведения процедур с аппаратом рекомендуется не наносить декоративную косметику в течение 8 часов.
13. После каждого использования тщательно очищайте и дезинфицируйте лопатку: ее можно протереть сначала влажной тканью, а затем ватным диском, смоченным в 70% растворе спирта или хлоргексидине. Не допускайте попадания воды в корпус устройства, на кнопку «Вкл/Выкл» и на контакты для зарядки. Когда лопатка высохнет, закройте ее крышкой.

Внимание!

Во время проведения процедур обязательно очищайте лопатку от загрязнений чистой мягкой тканью или ватным диском.

Не используйте прибор чаще, чем 4 раза в неделю. В главе «Подготовка к работе и использование» приведены рекомендации по частоте использования прибора в каждом режиме, однако, если вы уже, например, 2 раза работали с прибором в режиме «Очищение», то используйте прибор еще не больше 2 раз (в независи-

мости от режима). Не проводите процедуры с аппаратом два дня подряд, делайте между процедурами перерывы. Проводите только одну процедуру в день.

В данной инструкции представлены усредненные рекомендации по частоте использования прибора и времени проведения процедур. Настоятельно рекомендуется перед использованием прибора проконсультироваться с косметологом или дерматологом, чтобы узнать, как часто необходимо проводить процедуры с аппаратом для ультразвуковой чистки кожи в вашем случае. Возможность проведения других косметологических процедур до или после ультразвуковой чистки также согласовывайте с врачом.

Не давите слишком сильно на кожу во время использования аппарата. При дискомфорте во время работы с прибором прекратите процедуру и обратитесь к врачу. Не используйте аппарат после проведения других видов аппаратных процедур, а также механических или химических пилингов.

Возможно временное покраснение кожи после использования прибора. Если краснота не прошла в течение 15–20 минут или появилась отечность, обратитесь к врачу. Если у вас хрупкие сосуды, перед использованием аппарата проконсультируйтесь с врачом. Будьте внимательны при выборе косметических средств, чтобы избежать аллергических реакций. При необходимости проконсультируйтесь с врачом, какие средства для работы с прибором вам можно использовать.

Меры предосторожности по применению

1. Перед применением настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
3. Подросткам и детям можно пользоваться прибором только после разрешения врача и под присмотром взрослых.
4. Существует ряд противопоказаний к применению, такие как:
 - беременность;
 - онкология;
 - инфекционные заболевания кожи;
 - кожа, склонная к аллергическим реакциям;
 - наличие имплантов;
 - нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
 - тяжелая форма акне;
 - наличие большого количества родинок на лице;
 - воспаления на коже лица;
 - купероз 3–4 степени;
 - парез лицевого нерва;
 - невралгия тройничного нерва;
 - варикозное расширение вен, тромбофлебит;
 - нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
 - остеопороз;



- наличие электронных устройств при заболевании сердца, например, кардиостимулятора;
- хроническая мигрень;
- недавняя операция или ввод инъекций;
- почечная недостаточность;
- повышенная температура, грипп, ОРВИ;
- сахарный диабет;
- менструация;
- наличие каких-либо заболеваний в острой форме;
- нечувствительность к теплу;
- гипогликемия;
- гипертония;
- слабость, нервозность и страх боли;
- переутомление.

Чистка и обслуживание

Перед проведением очистки, выключайте прибор и отключайте базу от источника питания. Протрите устройство влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Тщательно дезинфицируйте лопатку до и после использования: ее можно протереть ватным диском, смоченным в 70% растворе спирта или хлоргексидине.

Не допускайте попадания воды в корпус устройства, на кнопку «Вкл/Выкл», базу для зарядки, на контакты на базе и на корпусе прибора, на шнур USB Type-C и в разъем для шнура USB Type-C. Не используйте для чистки прибора абразивные моющие средства и жесткие губки.

Периодически протирайте контакты на базе и на устройстве мягкой сухой тканью.

Уход и хранение

Храните аппарат для ультразвуковой чистки лица в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать на хранение, очистите прибор, как указано в главе «Чистка и обслуживание». Храните прибор с закрытой крышкой, чтобы не повредить лопатку. На длительное хранение убирайте устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор прибора литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 2 часа.

При длительном хранении заряжайте аппарат наполовину примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня. Храните прибор при температуре от 0 до 40 °C.

Устранение неполадок

Аппарат для ультразвуковой чистки не включается, индикаторы не горят

Возможная причина	Решение
Аккумулятор устройства разряжен	Зарядите устройство

Устройство не заряжается

Возможная причина	Решение
Вы не до конца подключили шнур USB Type-C в разъем для зарядки	Вставьте шнур USB Type-C до конца
Слабый ток источника питания	Используйте источник питания с параметрами: $\approx 5 \text{ В}, 2 \text{ А}$
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Поврежден шнур USB Type-C	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 2 А
Контакты для зарядки на базе или на корпусе прибора загрязнены	Протрите контакты мягкой сухой тканью

Аппарат для ультразвуковой чистки перестал работать

Возможная причина	Решение
По истечении 8 минут использования сработало автоотключение устройства	Включите устройство, нажав и удерживая кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд

Лопатка слегка нагревается во время использования

Возможная причина	Решение
Лопатка слегка нагревается из-за воздействия ультразвуковых колебаний	Это нормально и не является неисправностью

Не заметен эффект от проведения процедуры

Возможная причина	Решение
От 1–2 процедур эффект будет незаметен	Это нормально и не является неисправностью прибора. Эффект от процедуры ультразвуковой чистки лица будет заметен только после нескольких использований и при условии, если все этапы очистки, размягчения кожи и последующего ухода за кожей лица были выполнены

Неприятные ощущения во время процедуры

Возможная причина	Решение
Вы проводите процедуру по сухой коже	Не используйте прибор на сухой коже! Всегда наносите средство для ультразвуковой чистки или крем/сыворотку для режимов «Микромассаж» и «Питание». Если используемое средство слишком густое, прибор может работать менее эффективно и движение лопатки по коже будет затруднено. Используйте менее густое средство

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C =5 В, 2 А
2. Мощность: 2,4 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 0,5 А*ч (1,85 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Частота ультразвуковых колебаний: 24000 Гц
6. Уровень шума: ≤40 дБ
7. Время зарядки: 4 ч
8. Время работы от аккумулятора: 1 ч
9. Количество режимов работы: 4
10. Автоотключение: через 8 мин
11. Длина шнура USB Type-C: 0,7 м
12. Размер устройства: 51 × 30 × 173 мм
13. Размер устройства на базе: 174 × 52 × 50 мм
14. Размер упаковки: 210 × 194 × 62 мм
15. Вес нетто: 0,3 кг
16. Вес брутто: 0,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь АЙФАЙН Текнолэджи Ко., Лтд. 4 Флор, Хуаньань Индастри Парк, Юнфэн 4 Роуд, Байшия Ист, Фуюн Таун, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помеш. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помеш. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его на более безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания воды, косметических средств, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на базу, в область разьема шнура USB Type-C, контактов для зарядки на базе и на устройстве, на кнопку «Вкл/Выкл» и шнура USB Type-C не считается гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте аппарат для ультразвуковой чистки лица только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

5. Не используйте и не заряжайте устройство, если прибор, шнур USB Type-C или база повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться аппаратом для ультразвуковой чистки лица только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу аппарата для ультразвуковой чистки лица, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий аппарат для ультразвуковой чистки лица без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
9. Держите прибор только сухими руками.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в базу для зарядки, в область разъема шнура USB Type-C, контактов на устройстве и на базе, на шнур USB Type-C и на кнопку «Вкл./Выкл».
15. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Никогда не используйте прибор на сухой коже! Перед использованием наносите на кожу специальное средство для ультразвуковой чистки.
17. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности и при наличии имплантов, прибором пользоваться запрещено.
18. Не используйте прибор на участках кожи с воспалениями или акне. Тяжелая форма акне является противопоказанием к использованию прибора. При использовании прибора не проводите лопаткой по родинкам! Не используйте прибор на шее, ультразвуковые волны могут нанести вред щитовидной железе. Не используйте прибор на других частях тела. Если у вас есть пирсинг на лице, перед использованием аппарата снимите украшения.
19. В данной инструкции представлены усредненные рекомендации по частоте использования прибора. Настоятельно рекомендуется перед использованием прибора проконсультироваться с косметологом или дерматологом, чтобы узнать как часто необходимо проводить процедуры с аппаратом для ультразвуковой чистки кожи в вашем случае. Возможность проведения других косметологических процедур до или после ультразвуковой чистки также согласовывайте с врачом.

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Инфракрасная плита КТ-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

Ручной отпариватель КТ-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая глажка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов

Настольная лампа КТ-3326

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона







Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87