

**Зубная  
гигиена –  
не проблема!**



**Электрическая  
зубная щетка  
КТ-2954**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**info@kitfort.ru**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	5
Устройство зубной щетки.....	5
Подготовка к работе и использование .....	6
Чистка и обслуживание .....	8
Уход и хранение .....	8
Устранение неполадок.....	8
Технические характеристики.....	9
Меры предосторожности .....	10

## Общие сведения

Звуковая зубная щетка КТ-2954 предназначена для ухода за полостью рта и чистки зубов. Звуковая зубная щетка — разновидность электрической зубной щетки.

Звуковые колебания раскачивают щетинки насадки с частотой 260 Гц. Колебания разрушают зубной камень и налет, а головка щетки совершает 29600–34000 выметающих движений в минуту, удаляя его. Именно такими движениями рекомендуют чистить зубы стоматологи. Однако ручной зубной щеткой вам не удастся сделать такое количество движений за всю чистку зубов.

Также за счет звуковых колебаний при чистке зубов получается мощный поток из зубной пасты и слюны, создающий ирригационный эффект и очищающий межзубное пространство.

Для чистки зубов достаточно просто слегка прижать щетинки к зубу и десне, а затем лишь плавно передвигать щетку от зуба к зубу в горизонтальной плоскости. Чистить зубы звуковой зубной щеткой легко и просто. Звуковая щетка подходит для ежедневной чистки зубов. Однако некоторые стоматологи рекомендуют пользоваться ей 3–4 раза в неделю, чередуя с ручной или электрической зубной щеткой с вращающейся головкой. Не рекомендуется пользоваться звуковыми щетками детям, неокрепшая эмаль не готова к такой скорости очистки и может начать разрушаться.

Для эффективного очищения рекомендуется чистить зубы 2 минуты. В зубной щетке КТ-2954 установлен таймер, по истечении 2 минут щетка автоматически отключится. Также для равномерной чистки каждой зоны зубная щетка делает небольшую паузу каждые 30 секунд.

У звуковой зубной щетки есть три режима работы: чистка, отбеливание и уход. Включить зубную щетку и выбрать режим очень просто — на корпусе расположена всего одна кнопка, циклически переключающая 3 режима работы. Индикаторы режимов показывают, какой режим включен. Чтобы отслеживать уровень заряда аккумулятора, на корпусе также есть индикатор уровня заряда.

В комплекте с щеткой поставляется 2 насадки с колпачком, база для зарядки, крышка щетки и защитная насадка на вал двигателя. Наличие 2 насадок позволяет пользоваться звуковой щеткой сразу двум членам семьи или по мере изнашивания одной насадки заменить ее. Рекомендуется менять насадку каждые 3 месяца или по мере изнашивания щетинок. Колпачок для каждой насадки служит для хранения и защищает щетинки от пыли и грязи. Однако необходимо помнить, что после каждой чистки зубов необходимо промыть и просушить щетинки. Вы также можете брать щетку с собой в дорогу, так как щетку с установленной насадкой можно закрыть крышкой и не бояться повреждений или грязи.

## Комплектация

1. Электрическая зубная щетка с крышкой и заглушкой — 1 шт.
2. Насадка с колпачком — 2 шт.
3. Защитная насадка — 1 шт.
4. База для зарядки — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство зубной щетки



**Кнопка «Вкл/Выкл»** включает и отключает щетку, а также циклически переключает режимы.

У щетки КТ-2954 три режима работы:

- «Чистка» — в данном режиме чистящая головка совершает 32000 движений в минуту, создавая поток из зубной пасты и слюны, который эффективно очищает налет и остатки пищи. Этот режим подходит для ежедневного использования.



- «Отбеливание» — режим для более тщательной чистки, позволяющий бороться со стойкими загрязнениями и налетом, например от курения, чая и кофе. Подходит для глубокой очистки или отбеливания зубов с помощью специальной зубной пасты. В режиме «Отбеливание» чистящая головка совершает 34000 движений в минуту.
  - «Уход» — чередование звуковых волн более высокой и низкой частоты, которые создают 29600 и 31600 движений в минуту, осуществляет не только чистку, но и массаж десен. Данный режим будет наиболее комфортным для людей с чувствительными деснами, а также если вы только начинаете пользоваться звуковой электрической щеткой.
- У каждого режима есть свой индикатор на корпусе, который горит, когда включен соответствующий режим.

Индикатор уровня заряда горит постоянно, когда зарядка аккумулятора завершена; и мигает, если уровень заряда низкий при использовании или при зарядке аккумулятора от базы.

Защитная насадка устанавливается на вал двигателя при транспортировке или если насадка с щетинками не установлена. Заглушка установлена снизу зубной щетки и защищает внутренние детали от влаги.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте зубную щетку и аксессуары и удалите упаковочные материалы. Перед первым использованием протрите корпус мягкой тканью и зарядите аккумулятор.

Насадку для щетки необходимо промыть, просушить и установить на вал двигателя. Не забудьте снять защитную насадку с вала двигателя. Чтобы установить насадку на вал двигателя, необходимо просто надеть ее до упора так, чтоб щетинки были направлены в ту же сторону, что и кнопка «Вкл/Выкл». Обратите внимание, что насадка не надевается вплотную к корпусу зубной щетки, остается зазор около 1 мм. Это сделано специально, чтобы избежать повреждения корпуса и насадки при вибрации.

**Примечание.** Не включайте зубную щетку с установленной на вал двигателя защитной насадкой, без насадки или в случае, если на насадку для чистки зубов надет колпачек.

### Зарядка зубной щетки

Если при работе зубной щетки индикатор заряда мигает, у аккумулятора низкий заряд. В этом случае зарядите аккумулятор. Если устройство не включается, значит, аккумулятор разрядился полностью.

Для зарядки подходит база для зарядки из комплекта, которая подключается при помощи шнура USB к источнику питания. Подключите базу к блоку питания. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами:  $\approx$ 5 В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др. Затем установите зубную щетку в углубление на базе, убедившись перед этим, что зубная щетка сухая.

**Электрическая  
зубная щетка КТ-2954**


Когда аккумулятор заряжается, индикатор заряда мигает. При полном заряде индикатор заряда горит непрерывно. Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 6,5 часов. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разрядки — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

По окончании зарядки отсоедините шнур USB от источника питания.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

**Использование**

1. Установите насадку на вал двигателя. Снимите колпачок с насадки.
2. Смочите щетинки водой и нанесите небольшое количество зубной пасты на них.
3. Поместите головку зубной щетки в рот и только после этого включите щетку, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». В противном случае паста упадет или разбрызгается.
4. Чтобы переключить режим, нажимайте на кнопку «Вкл/Выкл» до тех пор, пока не загорится индикатор нужного режима.
5. Расположите щетинки под углом 45° к линии десен. Плавно передвигайте зубную щетку по полости рта. При чистке звуковой зубной щеткой не нужно совершать дополнительные выметающие или круговые движения. Не давите на зубную щетку слишком сильно. Не касайтесь зубов пластиковой частью щетки во время чистки.
6. Рекомендуется условно разделить зубы на 4 участка и каждые 30 секунд, когда щетка подает сигнал, менять зону. Это обеспечит равномерную чистку всех зубов.

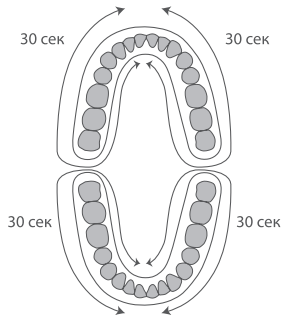

7. По истечении 2 минут зубная щетка автоматически отключится. Если вам не хватило этого времени, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» и дочистите те зубы, которые не успели. Чтобы выключить зубную щетку, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
8. По окончании чистки прополощите рот, промойте щетину водой, дайте высохнуть и закройте колпачком. Храните зубную щетку в вертикальном положении в стаканчике, чтобы вода могла беспрепятственно стекать с щетинок. Будьте осторожны и не роняйте зубную щетку.



**Примечание.** Если вы пользуетесь звуковой зубной щеткой в первый раз, установите режим «Уход», иначе чувствительные десны могут быть травмированы. Со временем десны привыкнут к новым ощущениям, и можно будет попробовать установить режимы «Чистка» или «Отбеливание».

В первое время использования возможна небольшая кровоточивость десен. Если у вас наблюдается сильная кровоточивость десен после двух недель использования звуковой зубной щетки, проконсультируйтесь с врачом.

## Чистка и обслуживание

После каждого использования промывайте зубную щетку водой и тщательно просушивайте головку зубной щетки. Корпус щетки рекомендуется протирать влажной мягкой тканью.

## Уход и хранение

Храните зубную щетку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем, как убрать на хранение или закрыть щетку крышкой, необходимо тщательно промыть и высушить насадку и очистить зубную щетку. При длительном хранении зубной щетки без насадки, наденьте защитную насадку на вал двигателя.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если зубная щетка не используется в течение длительного времени, заряжайте ее каждые 3–6 месяцев, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство на половину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите зубную щетку, затем заряжайте примерно 3 часа.

## Устранение неполадок

**Устройство не включается, индикация не горит**

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр



### Зубная щетка не заряжается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки зубной щетки от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите и включите пауэрбанк
Поврежден шнур USB	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Питание:  $\approx$ 5 В, 1 А
2. Мощность: 2 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током:
  - зубной щетки: III
  - базы для зарядки: III
4. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 0,5 А\*ч (1,85 Вт\*ч)
5. Частота звуковых колебаний: 260 Гц
6. Режимов работы: 3
7. Время зарядки: 6,5 ч
8. Время работы: 2 ч
9. Длина шнура: 1,1 м
10. Размер устройства: 27 × 27 × 225 мм
11. Размер упаковки: 82 × 248 × 60 мм
12. Вес нетто: 0,31 кг
13. Вес брутто: 0,41 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Юйлэ Текнолэджи Ко., Лтд. 9Ф, Юнит 3, Билдинг 1, Ньяньхуа Гардэн, №3 Линьбэй Роуд, Наньвань Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.



Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

#### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя зубной щетки или базы для зарядки вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, на разъем шнура питания не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении от источника питания.

6. Не используйте устройство, если шнур питания или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура питания.
16. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
17. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
18. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
19. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем снимите щетку с базы для зарядки.
20. Людям, которые недавно перенесли периодонтальную или стоматологическую хирургическую операцию, а также тем, кто проходит курс лечения, связанный с проблемами в ротовой полости, перед применением звуковой зубной щетки необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Звуковая зубная щетка не подходит для детей.
21. Если у вас наблюдается сильная кровоточивость десен после двух недель использования звуковой зубной щетки, обратитесь к врачу и проконсультируйтесь с ним по этому поводу.



Kitfort

## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87