

**BORK**

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА F550


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



## Мобильное приложение BORK

Зарегистрируйте технику в мобильном приложении.

Вы получите быстрый доступ к инструкциям, аксессуарам, напоминаниям о необходимости замены расходных материалов, а также к рецептам, новинкам и эксклюзивным коллекциям.

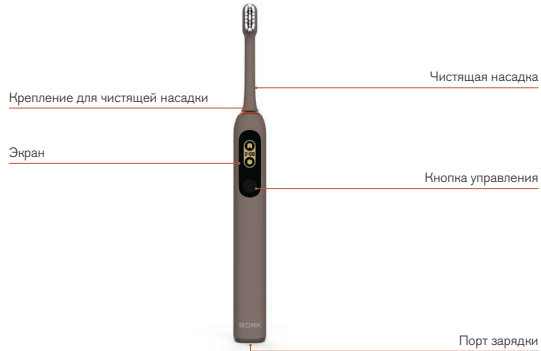

#### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя.
- Удалите и безопасно утилизируйте упаковочные материалы.
- Зарядите устройство в течение 3 часов.

#### ВКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

- Установите чистящую насадку.
- Нажмите и удерживайте кнопку управления на полторы секунды для активации щетки.
- Нажмите кнопку еще раз для входа в меню выбора режима чистки.
- Для переключения режимов зажмите кнопку управления на 1 секунду. Коротким нажатием на кнопку запустится выбранный режим.

Таймер на экране отображает оставшееся время чистки.

- Для паузы вновь нажмите на кнопку управления.

#### ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ


Зеленый: 10–100 %  
Желтый: 3–10 %  
Красный: 1–3 %

Не рекомендуется использовать зубную щетку при уровне заряда ниже 3 %.

- После завершения зарядки плотно закройте зарядный порт.

#### УСТАНОВКА ЧИСТЯЩЕЙ НАСАДКИ

- Убедитесь, что щетина щетки направлена строго над экраном.
- Установите насадку вертикально вниз до упора. Обратите внимание, что при этом между корпусом и насадкой остается расстояние в 0.5–0.8 мм.

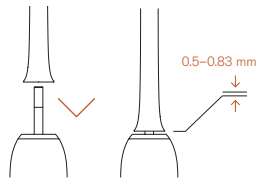

## ЗАМЕНА ЧИСТЯЩЕЙ НАСАДКИ

- Для замены чистящей насадки потяните ее вверх с небольшим усилием.
- После этого установите новую насадку.

Рекомендуется использовать насадку не дольше 90 дней.

## РЕЖИМЫ ЧИСТКИ

- Стандартная чистка – двухминутная чистка средней жесткости.
- Отбеливание – двухминутная чистка с изменяемой жесткостью (для чистки и отбеливания зубов).
- Глубокая чистка – режим с максимальной силой очистки в течение двух минут.
- Бережная чистка – мягкий режим, рекомендуется использовать при вечерней чистке зубов.
- Массаж – режим для стимуляции и массажа десен.

## ХРАНЕНИЕ

- Храните прибор в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.
- Оберегайте прибор от значительных перепадов температур.

При длительном хранении рекомендуется заряжать прибор раз в 6 месяцев.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не используйте прибор без установленных насадок.
- Не используйте никакие другие насадки, кроме оригинальных насадок, идущих в комплекте.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Не рекомендуется использовать прибор людям с заболеваниями ротовой области, а также перенесшими операции на зубах и в ротовой области.
- Не пытайтесь разобрать или модифицировать прибор.
- Используйте обычную воду из-под крана или очищенную воду.
- Не используйте ароматические добавки для воды или другие жидкости.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 1.5 Вт  
Напряжение: 5 В --- 0.5 А  
Защита от влаги: IPX7  
Габариты (Ш × Г × В):  
24.5 × 25.2 × 24.5 мм  
Вес: 115 г.

Сделано в Китае.

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор: 1 шт.  
Насадки: 2 шт.  
Зарядный провод: 1 шт.  
Руководство по эксплуатации  
с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.  
Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте [bork.ru](http://bork.ru)

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>. Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104. Тел.: 8 800 500 88 99. Электронная почта: [info@bork.ru](mailto:info@bork.ru)

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Изделие . . . Электрическая зубная щетка  
Модель . . . F550 . . . . .  
Серийный номер . . . . .  
Дата приобретения . . . . .  
Информация о продавце . . . . .  
(наименование, юридический адрес)  
. . . . .

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер. Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен

.....  
Подпись покупателя

..... М. П. ....  
Подпись продавца

## УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

### **Гарантия не распространяется:**

- на элементы и детали, имеющие естественный износ.

При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

### **Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:**

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- невалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;

- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации; обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

### **Адрес сервисного центра**

ООО «Премиум Сервис», г. Москва,  
Большая Садовая ул., д. 10.  
Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе на сайте [bork.ru](http://bork.ru) или по телефону 8 800 500 88 99.



