




GÉZATONE

МАССАЖЕР-КОРРЕКТОР
ДЛЯ БЮСТА

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ
Biolift4 m502

МАССАЖЕР КОРРЕКТОР ДЛЯ БЮСТА

- КРАСИВАЯ ГРУДЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ КРАСОТЫ, НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО СЕКСУАЛЬНОГО ОБРАЗА, ЖЕНСКОЙ ГОРДОСТЬЮ.
- КРАСОТА ЖЕНСКОЙ ГРУДИ ПРИТЯГИВАЕТ И ЗАВОРАЖИВАЕТ, ВОСПЕВАЕТСЯ ПОЭТАМИ, ИЗОБРАЖАЕТСЯ НА ПОЛОТНАХ ХУДОЖНИКОВ.
- КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ГРУДЬ БЫЛА УПРУГОЙ И СОХРАНЯЛА ФОРМУ ДОЛГИЕ ГОДЫ.

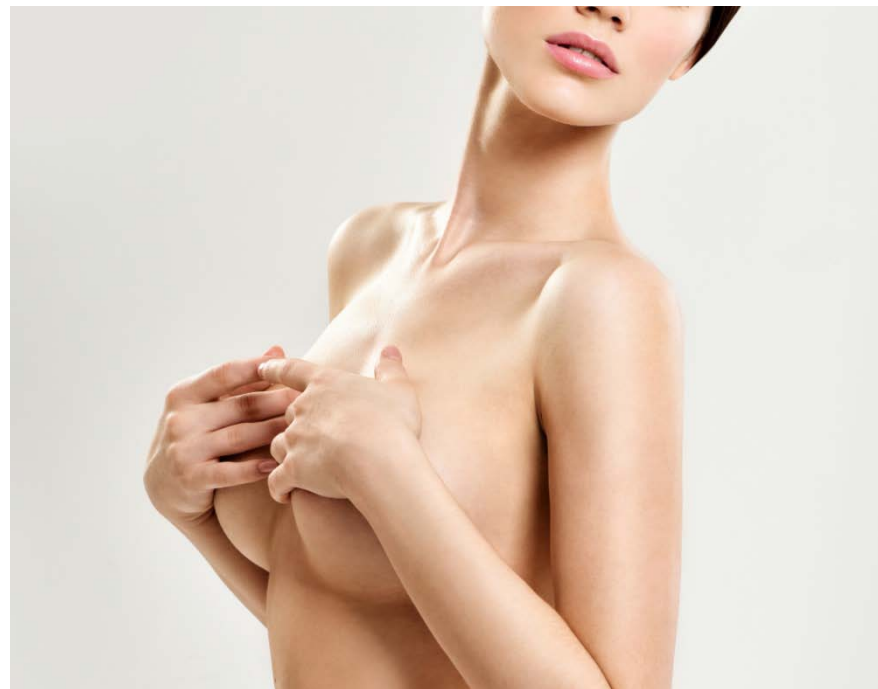


МАССАЖЕР КОРРЕКТОР ДЛЯ БЮСТА

Изменение формы груди происходит с возрастом, в результате резкой потери веса, при нерегулярном уходе в период беременности и лактации, по причине неправильного подбора бюстгалтера и других факторов.

ПРОБЛЕМЫ

- Изменение формы груди
- Дряблость, растяжки в области бюста
- Возрастные изменения бюста и области декольте
- Грудь небольшого размера
- Одной из причин изменения формы груди является снижение тонуса и ослабевание грудных мышц, которые нужно тренировать, как и другие мышцы тела.

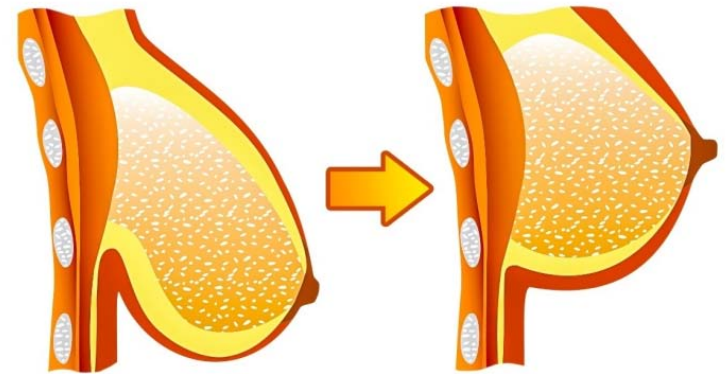


МАССАЖЕР КОРРЕКТОР ДЛЯ БЮСТА

ТЕХНОЛОГИЯ ЭМС – РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

МАССАЖЕР КОРРЕКТОР ДЛЯ БЮСТА GEZATONE ИМЕЕТ ПЯТЬ ПРОГРАММ, СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫХ С УЧЕТОМ СТРОЕНИЯ ЖЕНСКОГО ТЕЛА И ПОЗВОЛЯЕТ:

- улучшить форму и размер груди
- подтянуть и придать тонус мышцам груди
- повысить упругость кожи бюста и декольте
- уменьшить видимость растяжек и предотвратить появление новых
- восстановить прежнюю форму груди после рождения ребенка и периода лактации

Прибор подходит для использования женщинами любого возраста, начиная с 18 лет, в целях профилактики преждевременных изменений формы или для коррекции изменений и повышения тонуса грудных мышц.

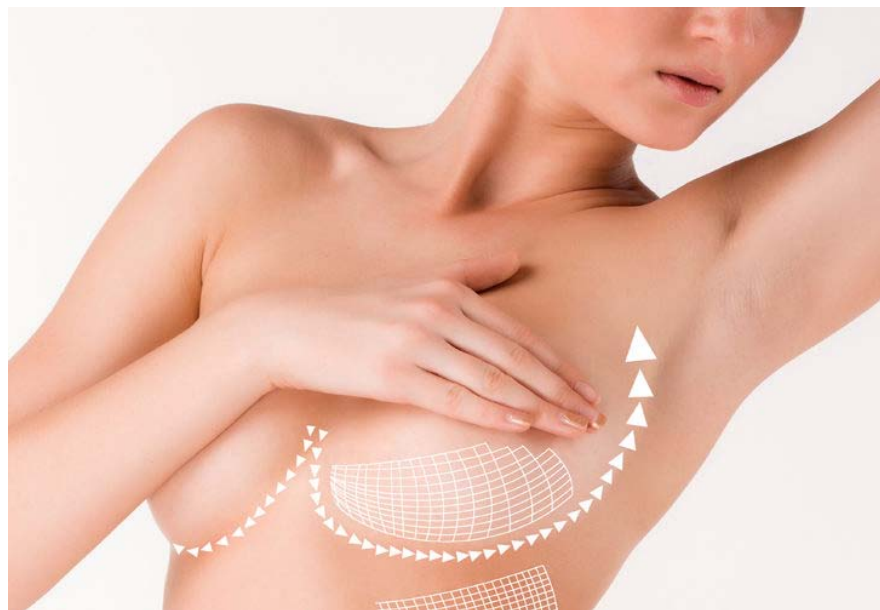

МАССАЖЕР КОРРЕКТОР ДЛЯ БЮСТА


КАК ЭТО РАБОТАЕТ

- **ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИЯ (ЭМС)**

имитирует естественные сокращения мышц. Сигналы подаются к нервным окончаниям, которые управляют мышцами и заставляют их сокращаться естественным образом.


- ЭМС тренирует, укрепляет и тонизирует грудные мышцы, устраняет дряблость кожи и способствует улучшению формы груди.

- ЭМС улучшает кровообращение, что способствует насыщению кислородом и питательными веществами, а также выведению токсинов и устранению застойных явлений.

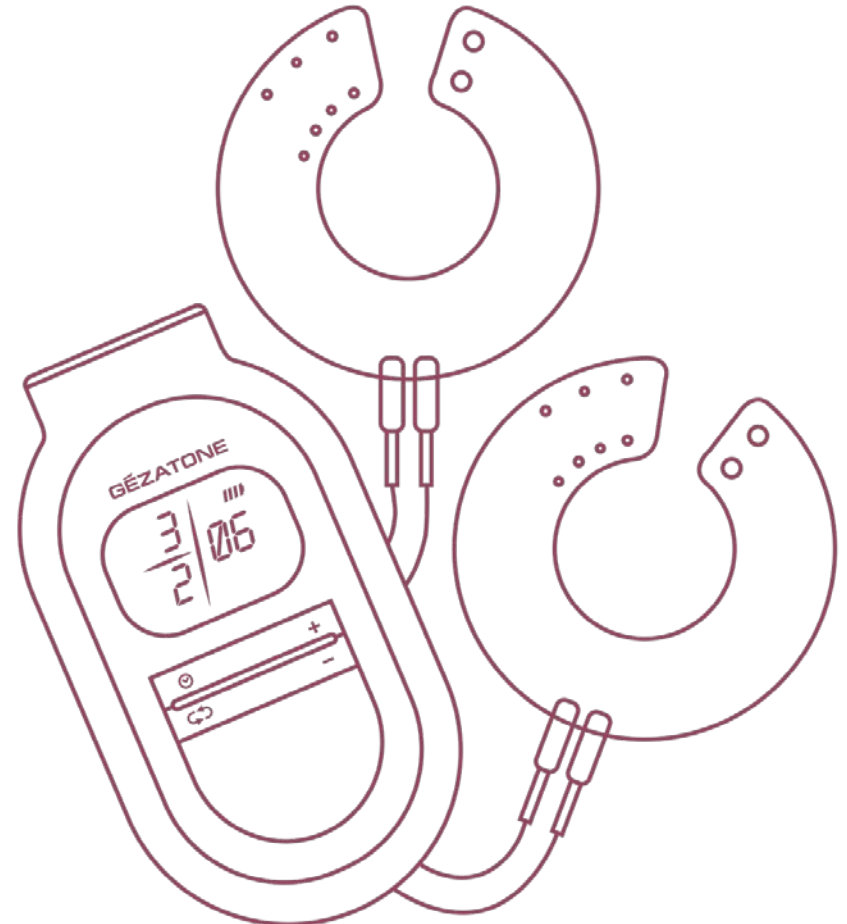

МАССАЖЕР КОРРЕКТОР ДЛЯ БЮСТА

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ИЗДЕЛИЯ

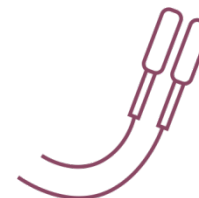

МАССАЖЕР КОРРЕКТОР ДЛЯ БЮСТА

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ИЗДЕЛИЯ



ЭФФЕКТИВНО

использование безопасной и проверенной временем методики ЭМС.



БЫСТРО

15 минут в день, не отвлекаясь от привычной домашней работы или отдыха.



КОМФОРТНО

массажер имеет пульт управления, прост и удобен в использовании.



ИНДИВИДУАЛЬНО

5 программ и 16 уровней интенсивности для создания личного плана тренировок.



КОМПАКТНО

занимает мало места, весит менее 300 грамм, работает от батареек.

МАССАЖЕР КОРРЕКТОР ДЛЯ БЮСТА

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- Беременность и лактация
- Наличие имплантатов, датчиков сердечного ритма
- Хронические воспалительные процессы в организме
- Сердечно-сосудистая недостаточность в стадиях IIВ и III
- Гипертония
- Сахарный диабет
- Кожные заболевания, дерматиты, экземы, открытые раны, ожоги, порезы в области воздействия
- Туберкулез
- Нарушение свертываемости крови
- Онкологические заболевания
- Острые инфекционные заболевания
- Не рекомендуется проводить процедуру при гриппе, ОРВИ, повышенной температуре.

GÉZATONE

МАССАЖЕР КОРРЕКТОР ДЛЯ БЮСТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование: Массажер корректор для бюста m502 Gezatone,
или Biolift4 m502 Прибор для ухода и массажа за телом Gezatone

Артикул: 1301230

Источник питания: 2 батареи ААА

Напряжение питания: 3В

Потребляемый ток: 20мА При нагрузке 1кОм

Амплитуда выходных импульсов: 5 25Вх 50мА

Частота выходных импульсов: 48 -200Гц

Длительность выходных импульсов: 20-400мс.

Вес прибора: около 270 г.

Размер в упаковке: 270х190х280 мм


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Центральный блок прибора: 1 шт.

Электродные диски: 2 шт.

Соединительные провода: 2 шт.

Инструкция: 1 шт.

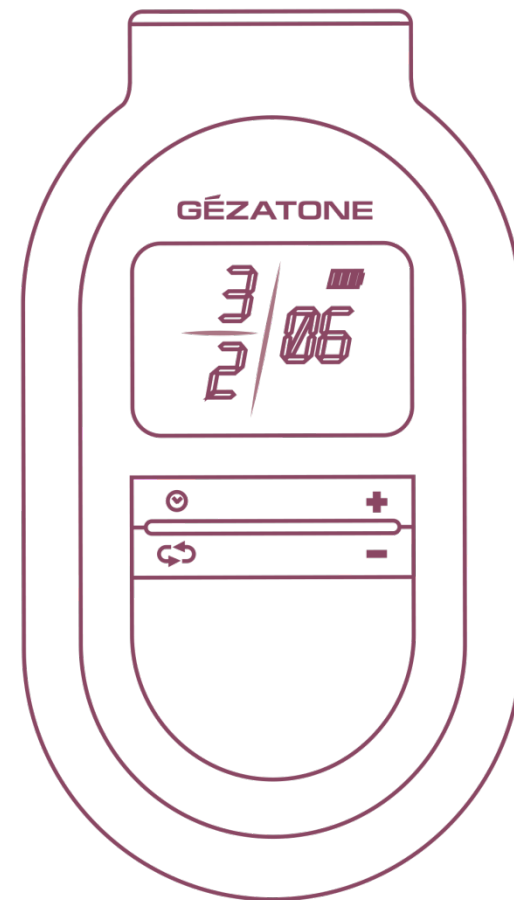

МАССАЖЕР КОРРЕКТОР ДЛЯ БЮСТА

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

**Гель
с экстрактом икры**
Beauty Style,
120 мл
Артикул: 4504006



ИЛИ

**Гель активный
"Ультралифт"**
Beauty Style, 300мл
Артикул: 4501416А



ИЛИ

**Лифтинг-гель для
бюста
"Alga gel bust"**
Beauty Style, 100
мл
Артикул: 4516301



**Крем для груди и
декольте
«Экспресс Лифтинг»**
Modellage, Beauty Style,
200 мл
Артикул: 4501819

