


**Разминаю  
и разогреваю!**

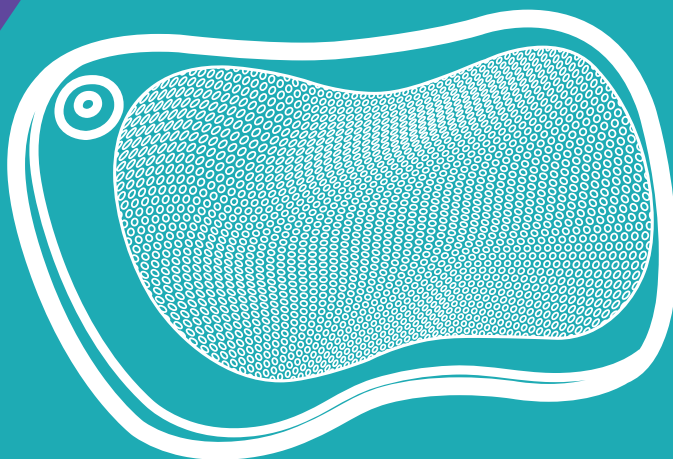

**Массажер  
КТ-2930**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство массажера .....	5
Подготовка к работе и использование .....	5
Чистка и обслуживание .....	7
Уход и хранение .....	7
Устранение неполадок .....	7
Технические характеристики .....	8
Меры предосторожности.....	9

## Общие сведения

Массажер-подушка Kitfort КТ-2930 поможет избавиться от дискомфорта в шейно-плечевом отделе, который может возникнуть после долгого сидения за компьютером, неудобной позы во время сна или тем, у кого сидячий образ жизни. Воздействуя на шею, позвоночник и плечи массажными роликами, массажер устраняет стресс и затекание мышц. Также устройство можно использовать для массажа поясницы, живота, бедер и стоп.

В данной модели массажера есть удобное крепление к стулу в виде резинки. Вы можете делать массаж прямо на рабочем месте. Массажером также можно пользоваться в автомобиле, подключив его к прикуривателю.

У массажной подушки чехол изготовлен из искусственной кожи — его легко можно очистить от загрязнений.

Управление прибором осуществляется с помощью одной кнопки.

У массажера есть функция инфракрасного прогрева, которая улучшает кровообращение и лимфоотток, тем самым повышая эффективность массажа.


После 15-минутного сеанса сработает таймер с автоотключением.

## Комплектация


1. Массажер — 1 шт.
2. Блок питания — 1 шт.
3. Автомобильный адаптер (в прикуриватель) — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство массажера

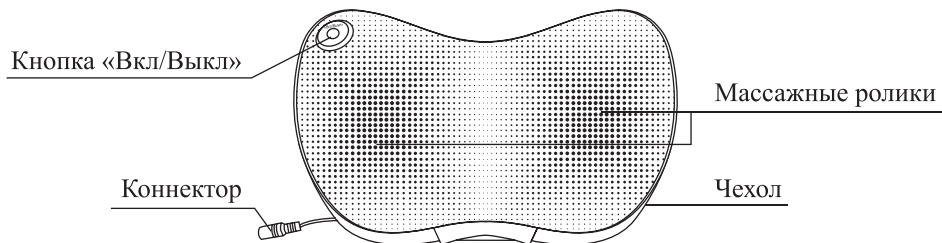

Блок питания

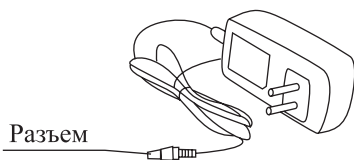

Автомобильный адаптер



Массажер включается нажатием на кнопку «Вкл/Выкл», ролики начинают работу. Сразу же включается инфракрасный прогрев, который работает совместно с вращением роликов. Через одну минуту работы ролики поменяют свое направление вращения и периодически будут его менять на протяжении всего рабочего цикла. Если вы не хотите ждать одну минуту, то можете нажать на кнопку второй раз — второе нажатие на кнопку меняет направление вращения роликов. Т.е. поменять направление роликов самостоятельно можно только один раз. Третье нажатие выключает функцию инфракрасного прогрева, не меняя направление вращения роликов при этом.

Чтобы выключить массажер, необходимо нажать на кнопку «Вкл/Выкл» в четвертый раз.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Распакуйте массажер и протрите его влажной тканью.

Вставьте коннектор массажера в разъем блока питания, а сам блок питания подключите к сети.

Поместите массажер на любую из зон, приведенных ниже на рисунке.



Шея



Голен



Поясница



Лопатки



Бедра

### **Использование**

Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» и устройство начнет работу. Меняйте направление роликов при желании. Выключите инфракрасный прогрев, нажав в третий раз на кнопку «Вкл/Выкл». Чтобы выключить массажер, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» в четвертый раз.

Один сеанс массажа длится 15 минут, далее сработает автоотключение. Если хотите начать новый сеанс, то во избежание перегрева устройства подождите 10–15 минут и нажмите на кнопку включения.

### **Меры предосторожности по применению**

1. Перед применением желательно проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
3. Существует ряд противопоказаний к применению, такие как:
  - инфекционные заболевания кожи;
  - остеопороз;
  - наличие электронных устройств, при заболевании сердца, например, кардиостимулятора;
  - повышенная температура;
  - сахарный диабет.
4. Пользоваться с осторожностью при:
  - беременности;
  - наличии ран или каких-либо заболеваний в острой форме;
  - нечувствительности к теплу;
  - переутомлении.

### **Советы**

1. Помимо массажа шейно-плечевого отдела, используйте прибор для массажа поясницы, живота, бедер или стоп. Для этого расположите массажер в той зоне, где это необходимо.
2. Пользуйтесь массажером в личном автомобиле, подключив массажер к прикуривателю через автомобильный адаптер (входит в комплект).

### **Внимание!**

- Не используйте массажер во время езды во избежание аварийных ситуаций на дороге. Если в дороге вы устали, припаркуйтесь и тогда используйте массажер.
3. Не используйте массажер более 3–5 минут на каждой части тела. Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Не прижимайте массажер сильно к массируемым частям тела. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь у врача.
  4. Если вы только начали пользоваться массажером, то не рекомендуются частые повторения сеансов. В противном случае на следующий день на теле могут появиться синяки и начаться боль в мышцах. Увеличивайте количество сеансов постепенно. Каждый сеанс длится 15 минут, далее у массажера срабатывает автоотключение.

## **Чистка и обслуживание**

Чистите чехол ворсовой щеткой или щеткой с микрофиброй. Не используйте агрессивные моющие средства.

Для чистки роликов используйте сухую мягкую ткань. Расстегните молнию на чехле массажера и протрите ткань образовавшуюся под чехлом пыль. Будьте осторожны, не повредите механизмы устройства при обслуживании.

## **Уход и хранение**

В случае если массажер не используется в течение долгого времени, очистите его от пыли и других загрязнений, и поместите на хранение в сухое место.

## **Устранение неполадок**

### **Массажер нагрелся**

Возможная причина	Решение
Вы провели несколько сеансов подряд	Отключите массажер от источника питания и дайте ему остыть 30 минут

### Массажер не работает

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Вилка не вставлена в розетку	Вставьте вилку в розетку
Массажер не включен	Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»
Закончился 15 минутный сеанс массажа и прибор автоматически выключился	Сработало автоотключение. Если хотите начать новый сеанс, то во избежание перегрева устройства подождите 10–15 минут и нажмите на кнопку включения

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

- Блок питания:
  - Вход:  $\sim 100\text{--}240\text{ В}$ , 50/60 Гц 0,8 А
  - Выход:  $\text{---}12\text{ В}$ , 2 А
- Мощность: 24 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током:
  - Блока питания: II
  - Массажера и автомобильного адаптера: III
- Размер устройства: 325 × 180 × 95 мм
- Размер упаковки: 365 × 115 × 190 мм
- Вес нетто: 1,2 кг
- Вес брутто: 1,6 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.



Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.

6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
15. Не используйте прибор под одеялом или подушкой, чтобы избежать перегрева. Иначе может произойти возгорание, поражение электрическим током или травмы.
16. Не переносите массажер за шнур питания и не используйте шнур в качестве ручки.
17. Никогда не эксплуатируйте изделие с заблокированными воздушными отверстиями, не допускайте попадания в них ворса, волос и тому подобного.
18. Не роняйте и не вставляйте какие-либо предметы в отверстия массажера.
19. Не пользуйтесь массажером на открытом воздухе.
20. Не позволяйте детям играть с массажером.
21. Держите шнур подальше от нагретых поверхностей, это может привести к серьезным повреждениям. Не используйте на нечувствительных участках кожи или при плохом кровообращении.
22. Прибор имеет поверхность с подогревом. Люди, нечувствительные к теплу должны быть осторожны при использовании прибора.
23. Прибор должен использоваться только с блоком питания, входящим в комплект поставки прибора.





# Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87