


**С заботой  
о твоём  
теле!**

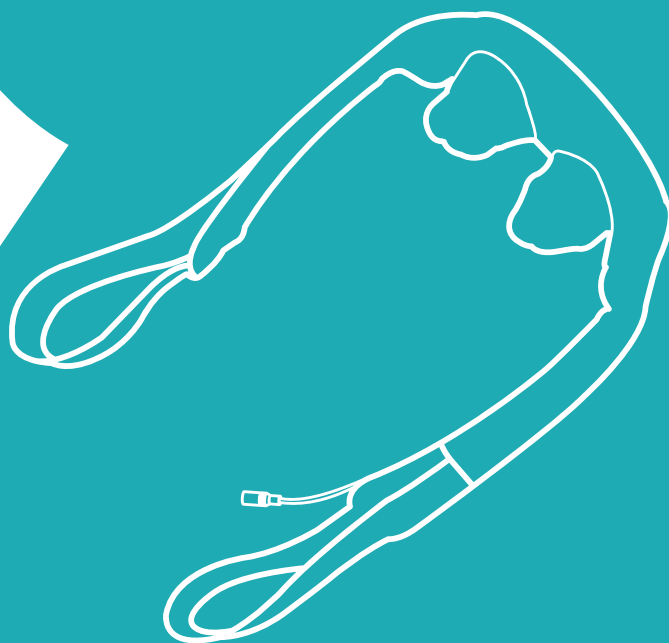

**Массажер для шеи  
КТ-2953**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство массажера для шеи .....	5
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание .....	7
Уход и хранение .....	7
Устранение неполадок .....	7
Технические характеристики .....	8
Меры предосторожности.....	9

## Общие сведения

Массажер для шеи КТ-2953 выполняет массаж шеи массажными роликами, воздействуя на мышцы шейно-воротниковой зоны. Роликовый массаж и тепло стимулируют и повышают тонус мышц шеи, расслабляют и снимают усталость, напряжение и болевые ощущения, а также улучшают циркуляцию крови. Благодаря инфракрасному нагреву эффективность массажа повышается и достигается лучшее расслабление мышц шеи. Такой массажер отлично подойдет для тех, кто долго работает за компьютером или часто испытывает дискомфорт и усталость в области шеи.

Также массажер КТ-2953 можно использовать для массажа других зон: поясницы, живота, бедер и стоп.

Управлять массажером очень просто, так как у него всего одна кнопка, которая включает и отключает массажер, а также переключает 3 режима работы. Вы можете включить или отключить автоматическую смену направления вращения массажных роликов и инфракрасный нагрев. Благодаря наличию трех режимов вы точно подберете массаж, который подходит вам лучше всего.

Рекомендуемая продолжительность сеанса массажа составляет 15 минут. Через 15 минут массажер автоматически отключается. Не используйте массажер на одной зоне более одного раза подряд и более двух раз в день.

Однако следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Массажер для шеи КТ-2953 не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях. Также массажер можно использовать только при отсутствии каких-либо повреждений кожи, например ран, царапин или аллергических высыпаний.

## Комплектация

1. Массажер — 1 шт.
2. Блок питания — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство массажера для шеи



**Кнопка «Вкл/Выкл»** включает и отключает массажер, циклически переключает 3 режима работы:

- первое нажатие включает массажер — вращение роликов, инфракрасный нагрев и автоматическая смена направления вращения роликов каждую минуту;
- второе нажатие отключает автоматическую смену направления вращения роликов (вращение роликов и инфракрасный нагрев включены);
- третье нажатие отключает нагрев (включено только вращение роликов без автоматической смены направления);
- четвертое нажатие отключает массажер.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте массажер и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием протрите массажер мягкой тканью.


### Использование

1. Перед выполнением массажа убедитесь, что кожа чистая. Если у вас длинные волосы, соберите их так, чтобы они не мешали. В зоне массажа не должно быть

посторонних предметов: украшений, молний, швов или декоративных элементов одежды. Одежда должна быть удобной и не стесняющей движения.

2. Вставьте в разъем шнур блока питания. Блок питания подключите к сети.
3. Наденьте массажер на шейно-воротниковую зону так, чтобы кнопка «Вкл/Выкл» оказалась слева. Примите удобное положение, шея не должна быть напряжена. Руки просуньте в петли ручек массажера.

**Примечание.** Вы можете использовать массажер для выполнения массажа передней и задней поверхности бедра, поясницы, стоп, живота.

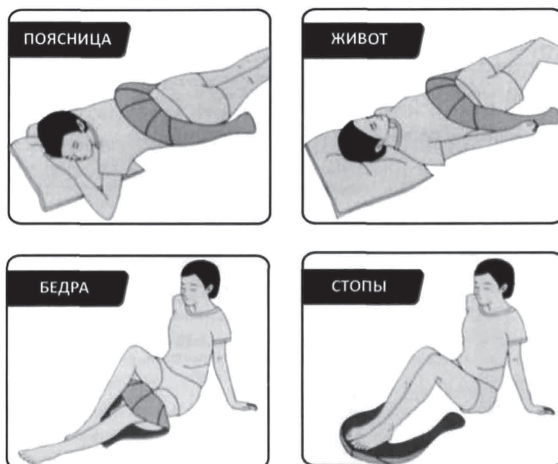

4. Чтобы включить массажер, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Массажер включится: ролики будут вращаться, инфракрасный нагрев будет включен, направление вращения будет меняться каждую минуту.
5. Если вы хотите отключить автоматическую смену направления вращения или отключить нагрев, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще 1 или 2 раза.
6. Рекомендуемая длительность сеанса массажа — 15 минут. По истечении 15 минут массажер автоматически отключается. Если вы хотите отключить массажер раньше, нажимайте на кнопку «Вкл/Выкл», пока массажер не отключится.
7. Отключите блок питания от сети, отсоедините шнур блока питания от массажера. Протрите массажер мягкой влажной тканью.

**Примечание.** При возникновении неприятных ощущений, прекратите массаж и проконсультируйтесь с врачом. Также не используйте массажер 2 раза подряд для одной и той же зоны. Если вы хотите использовать массажер повторно для другой зоны, подождите 15–30 минут, чтобы массажер не перегревался.

## Чистка и обслуживание

Протирайте массажер сухой или влажной мягкой тканью после каждого использования и перед использованием, если это необходимо. Для чистки массажера допускается использовать влажные салфетки, ткань, губку или ватный диск, смоченные в мыльном растворе. Не используйте агрессивные химические средства. Не мойте массажер. Не допускайте попадания жидкости внутрь массажера, на кнопку «Вкл/Выкл», шнур и разъем для шнура.

## Уход и хранение

Перед тем как убрать массажер на хранение, очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и уберите в коробку или пакет, чтобы защитить от пыли. Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, ролики не вращаются

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Шнур блока питания не подключен к массажеру	Вставьте штекер шнура блока питания в разъем массажера
Блок питания не подключен к сети	Подключите блок питания к сети
Устройство подключено к сети, но вы не включили его	Чтобы включить массажер, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»

### Ролики меняют направления вращения каждую минуту

Возможная причина	Решение
Установлен первый режим (после первого нажатия на кнопку «Вкл/Выкл» у массажера включается вращение роликов с автоматической сменой направления и нагрев)	Чтобы включить нагрев и вращение роликов в одном направлении, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще 1 раз. Чтобы включить только вращение роликов, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» 2 раза

### Ролики вращаются, но инфракрасный нагрев не осуществляется

Возможная причина	Решение
Установлен третий режим (после третьего нажатия на кнопку «Вкл/Выкл» у массажера включается только вращение роликов)	Чтобы включить нагрев и автоматическую смену направления вращения, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще 2 раза. Чтобы включить нагрев и вращение роликов в одном направлении, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» 3 раза

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

- Блок питания:
  - вход:  $\sim 100\text{--}240\text{ В}$ , 50/60 Гц, 0,8 А
  - выход:  $\text{---}12\text{ В}$ , 2 А
- Мощность: 24 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током:
  - блока питания: II
  - массажера: III
- Автоотключение: через 15 минут
- Длина шнура: 1,8 м
- Размер устройства: 290 × 125 × 560 мм
- Размер упаковки: 370 × 120 × 160 мм
- Вес нетто: 0,90 кг
- Вес брутто: 1,25 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.



Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:  
ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х,  
офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя массажера для шеи вследствие попадания жидкостей внутрь массажера, на разъем шнура блока питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Повреждение устройства вследствие чистки агрессивными моющими средствами не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура блока питания и органы управления.
15. При повреждении блока или шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

IM-1





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87