

**ТРАНСПОРТИРОВКА:**  
Допускается в производственной упаковке.

**УТИЛИЗАЦИЯ:**  
Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**  
Материал: АВС-пластик, металл, текстиль.  
Цвет: серый  
Входное напряжение: 110В-220В  
Мощность: 60 Вт.  
Частота: 50-60 Гц.  
Вес: 4.35 кг.  
Комплектация: массажер – 1 шт., инструкция.

Возможная неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Устройство не работает	вилка не плотно подключена к розетке	вставьте вилку правильно

**BRADEx™**  
Health & Beauty



KZ 0556  
МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА  
«БЛАЖЕНСТВО»

KZ 0568  
ВИБРОМАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА  
БЕСПРОВОДНОЙ  
С ФУНКЦИЕЙ ТАЙ ЧИ  
И ШИАЦУ МАССАЖА

KZ 0561  
МАССАЖЕР ВИБРАЦИОННЫЙ ДЛЯ ТЕЛА  
«МАССАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ»



KZ 0571  
МАССАЖНАЯ НАКИДКА  
С ПОДОГРЕВОМ

KZ 0567  
МАССАЖЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
БЕСПРОВОДНОЙ  
С ДИСПЛЕЕМ  
И 7 СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ

KZ 0570  
МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ  
С ФУНКЦИЕЙ МАССАЖА  
ГУАША ASIA SPA

**BRADEx™**  
Health & Beauty

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ  
С ФУНКЦИЕЙ ТАЙСКОГО МАССАЖА  
**СЕН СИП**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
KZ 0569



Премиальный массажер для ног с возможностью выбора вида массажа, аэрокомпрессии и прогрева воздействует на рефлекторные зоны стоп и способствует улучшению кровообращения, а также снятию напряжения, мышечной боли в ногах и усталости после физических нагрузок. Сен Сип - это 10 линий жизненной энергии, акупрессура которых вызывает терапевтический эффект. Режим ионизации воздуха делает процесс массажа еще более комфортным.


**ПРЕИМУЩЕСТВА:**  
1. Максимально удобная регулировка интенсивности массажа.  
2. Возможность индивидуальной настройки.  
3. Универсальный массажер для всей семьи с множеством функций:  
3.1. Функция прогрева;  
3.2. Функция аэрокомпрессии;  
4. Режим ионизации;  
5. Автовыключение.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:**  
Диабет, флебит, тромбоз, новообразования, воспалительные процессы, эпилепсия, беременность, остеопороз, воспаления, травмы, сердечные заболевания, гипертония, опухолевые процессы, мочекаменная болезнь, клапаны в сердце.  
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.  
Товар не является медицинским изделием.  
Разработан для расслабляющего массажа.  
Не использовать при ожогах и других поражениях кожи.

**ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:**  
• Храните в местах, недоступных для детей и животных.  
• Храните вдали от нагревательных приборов.

- ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:**
- Использовать только для массажа ног.
  - Каждый раз после использования отключайте массажер от сети.
  - Не оставляйте прибор включенным без присмотра.
  - Во избежание возможного возгорания не накрывайте массажер.
  - Не позволяйте детям использовать прибор самостоятельно.
  - Не эксплуатируйте поврежденный или неисправный массажер.
  - Не тяните за шнур.
  - Держите шнур вдали от нагревательных приборов и высоких температур.
  - Не используйте массажер в воде или при высокой влажности.
  - Если массажер упал в воду, не трогайте его руками и сразу отключите от розетки.
  - Если на массажер попала вода или другая жидкость, немедленно прекратите использование и отключите от розетки.
  - Не проводите процедуру массажа с мокрыми ногами.
  - Не используйте в ванной комнате.
  - Не вставляйте вилку шнура в розетку мокрыми руками.
  - Не разбирайте массажер самостоятельно, не трогайте внутренние детали.
  - Не стойте, не сидите на массажере, не давите сильно на массажные ролики.
  - Перед использованием убедитесь, что напряжение источника питания соответствует требованиям.
  - Будьте аккуратны при использовании прогрева.
  - Длительное использование и перегрев массажера может сократить срок службы прибора.
  - При перегреве отключите массажер и дайте ему остыть.

**ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА:**  
1. Съемные чехлы для ног  
2. Панель управления  
3. Корпус массажера

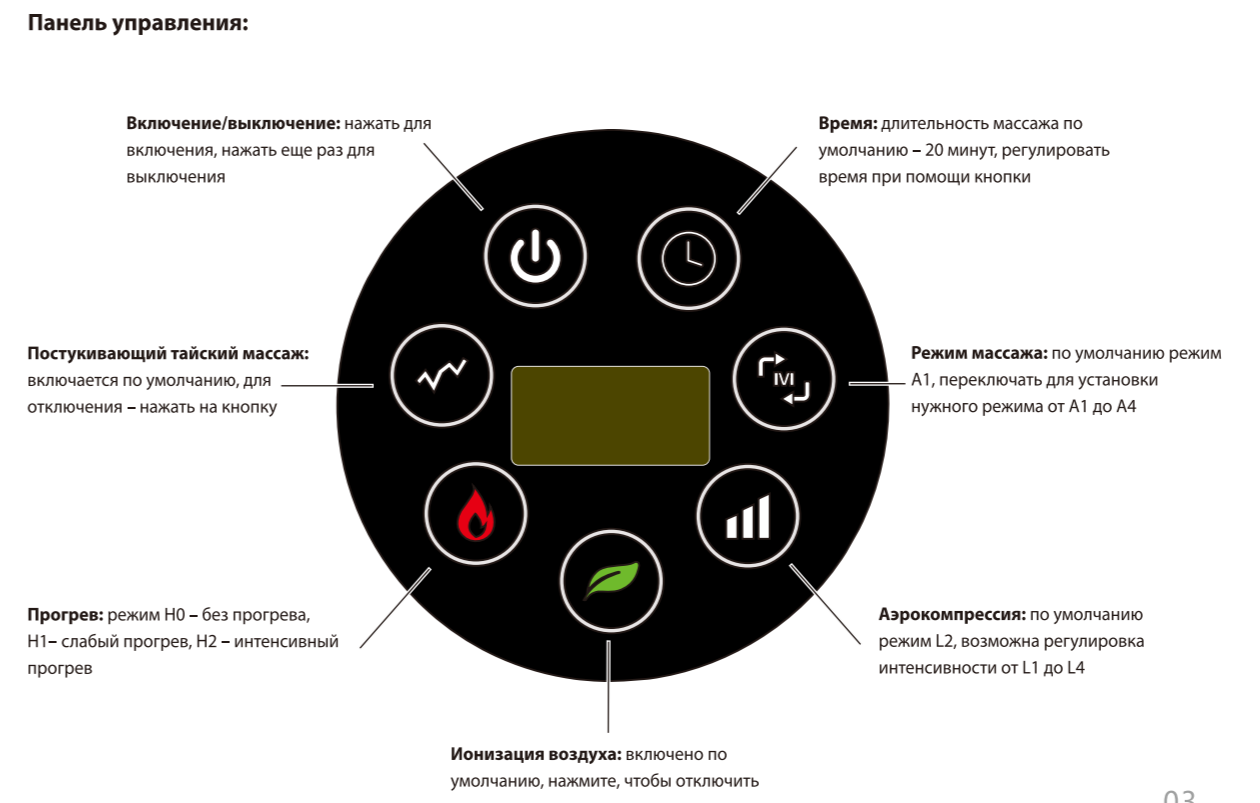

**ПОДГОТОВКА:**  
Установите массажер на пол перед креслом или стулом.  
Сядьте на кресло, вставьте ступни в массажер.  
Не вставляйте на ролики или корпус массажера.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ:**  
• Вставьте вилку в розетку, дисплей будет отключен.  
• Кнопка включения: нажмите для начала работы, нажмите еще раз для отключения. Режим по умолчанию: режим массажа A1, интенсивность компрессии L2, время 20 минут, прогрев H1, роликовый массаж, очищение воздуха и подсветка включены.  
• Постукивающий тайский массаж включен по умолчанию, нажмите еще раз, чтобы отключить. Массаж осуществляется под вашими ступнями и снимает мышечное напряжение ног.  
• Прогрев: режим по умолчанию H1, режим регулируется с H0 до H2. Прогрев ног улучшает кровообращение, сон, а также способствует снятию боли в ногах.  
• Ионизация воздуха: включено по умолчанию, нажмите, чтобы выключить. Встроенная технология ионизации воздуха освежает и удаляет возможный неприятный запах.  
• Компрессия: L2, регулируйте интенсивность компрессии от L1 (слабая) до L4 (сильная). Начните с L1 и увеличивайте при необходимости.  
• Режим массажа: по умолчанию A1, регулируйте от A1 до A4.

Режимы представляют из себя комбинации разминающего, роликового, постукивающего массажа, а также компрессии и прогрева. Попробуйте разные режимы для комфортной настройки массажа.  
• Таймер: длительность массажа по умолчанию 20 минут, регулируйте время массажа от 5 до 30 минут. Каждое нажатие кнопки добавляет 5 минут.  
• Когда массаж окончен, дисплей отключится, можно вынуть вилку из розетки.

**ХРАНЕНИЕ И УХОД:**  
Храните массажер в коробке в сухом прохладном месте.  
Избегайте контакта с острыми предметами.  
Не наматывайте провод на массажер, чтобы избежать повреждений.  
Не подвешивайте и не тяните массажер за шнур.

**СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ПРИБОРА:**  
• Отключите от розетки.  
• Расстегните молнию на съемных чехлах, постирайте, верните на место после полного высыхания.  
• При загрязнениях на корпусе протрите мягкой слегка влажной тряпочкой.  
• Если не используете массажер, храните его в сухом прохладном месте.  
• Избегайте попадания воды.  
• Не погружайте в воду.  
• Не используйте абразивные чистящие средства и щетки, которые могут поцарапать корпус массажера.