

Возможная неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Устройство не работает	· отключена кнопка включения · вилка не плотно подключена к розетке · продолжительное время использования · 30 минут и отсутствие перерыва в 10 минут	· нажмите на кнопку · вставьте вилку правильно · отключить и вынуть вилку после использования, дать постоять, массажер начнет работать в обычном режиме
Массажные ролики внезапно остановились во время работы	· массажер отключается автоматически после установленного времени · массажная головка заблокирована инородным предметом · массажер испытывает перегрузку от тяжелого веса: кто-то встал на массажер	· нажмите еще раз на кнопку включения · извлеките инородный предмет · отключить массажер от розетки, устранить причину перегрузки
Массажные головки перегрелись	· массажер испытывает перегрузку от тяжелого веса: кто-то встал на массажер	· отключить массажер от розетки, устранить причину перегрузки
Массажер задымился	· прекратить использование, обратиться в сервисный центр	



**МАССАЖЁР ДЛЯ НОГ
С ФУНКЦИЕЙ МАССАЖА ГУАША
ASIA SPA**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
KZ 0570



Премиальный массажер для ног в стильном дизайне с множеством функций: 3 вида массажа, аэрокомпрессия, подогрев и ионизация – с легкостью заменит вам поход в СПА-салон. Воздействуя на точки вашей стопы, массажер быстро улучшает общее состояние, снимает усталость, мышечную боль в ногах и перенапряжение. Функция подогрева стимулирует кровообращение, улучшает сон и помогает достичь полного расслабления.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Множество функций для индивидуальной настройки.
2. Подогрев и аэрокомпрессия для улучшения кровообращения.
3. Антибактериальный и дезодорирующий эффект благодаря генерации отрицательных ионов.
4. Автовключение.
5. Съемные чехлы из мягкого износостойкого материала.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Диабет, флебит, тромбоз, новообразования, воспалительные процессы, эпилепсия, беременность, остеопороз, воспаления, травмы, сердечные заболевания, гипертония, опухолевые процессы, мочекаменная болезнь, клапаны в сердце, расширение вен.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.
Товар не является медицинским изделием.
Разработан для расслабляющего массажа.
Не использовать при ожогах и других поражениях кожи.
Если вы чувствуете боль или дискомфорт во время массажа, прекратите использование.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Храните в местах, недоступных для детей и животных.
- Храните вдали от нагревательных приборов.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Перед использованием убедитесь, что напряжение источника питания соответствует требованиям.
- Использовать только для массажа ног.
- Каждый раз после использования отключайте массажер от сети.
- Не оставляйте прибор включенным без присмотра.
- Во избежание возможного возгорания не накрывайте массажер.
- Не позволяйте детям использовать прибор самостоятельно.
- Не эксплуатируйте поврежденный или неисправный массажер.
- Не разбирайте массажер самостоятельно.
- Не тяните за шнур.
- Держите шнур вдали от нагревательных приборов и высоких температур.
- Не используйте массажер в воде или при высокой влажности.
- Если массажер упал в воду, не трогайте его руками и сразу отключите от розетки.
- Если на массажер попала вода или другая жидкость, немедленно прекратите использование и отключите от розетки.
- Не проводите процедуру массажа с мокрыми ногами.
- Не используйте в ванной комнате.
- Не вставляйте вилку шнура в розетку мокрыми руками.
- Не разбирайте массажер самостоятельно, не трогайте внутренние детали.
- Не стойте, не сидите на массажере, не давите сильно на массажные ролики.
- Будьте аккуратны при использовании подогрева.
- Не прекращать работу массажера отключением от сети.
- Длительное использование и перегрев массажера может сократить срок службы прибора.
- При перегреве отключите массажер и дайте ему остыть.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА:

1. Съемные чехлы для ног
2. Панель управления

Панель управления:

Регулировка времени:

Время массажа по умолчанию – 20 мин.
регулировка от 5 до 30 минут,
каждое нажатие кнопки добавляет 5 минут.


Сила сжатия:

L1 – низкий уровень
L2 – средний уровень
L3 – высокий уровень
L4 – очень высокий уровень

Ионизация:

Работает по умолчанию, можно включить и отключить.

Включение / выключение

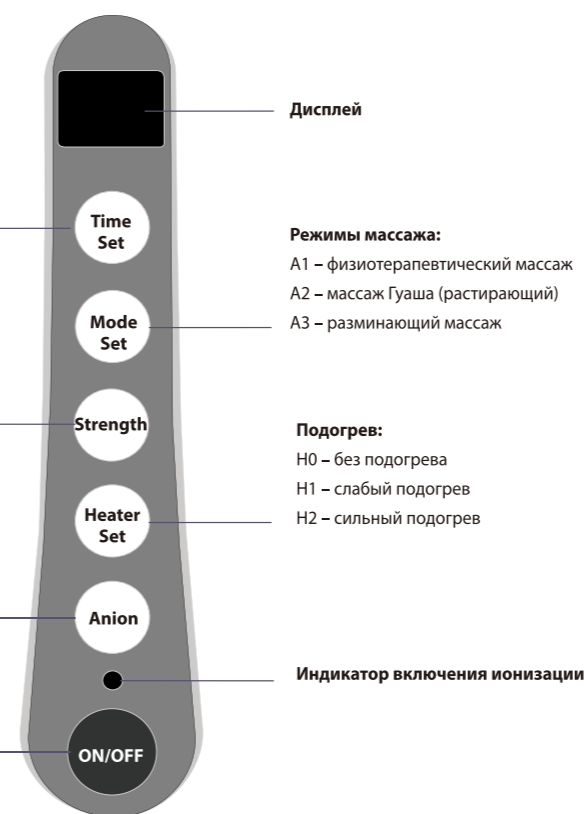

Режимы массажа:

A1 – физиотерапевтический массаж
A2 – массаж Гуаша (растирающий)
A3 – разминающий массаж

Подогрев:

H0 – без подогрева
H1 – слабый подогрев
H2 – сильный подогрев

ПОДГОТОВКА:

Установите массажер на пол перед креслом или стулом.
Не вставляйте на кресло, вставьте ступни в массажер.
Не становитесь на ролики или корпус массажера.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Вставьте вилку в розетку.
Нажмите кнопку включения.
Настройте необходимые для вас функции массажа.
После окончания массажа нажмите на кнопку включения еще раз.
Извлеките вилку из розетки.

ХРАНЕНИЕ И УХОД:

Храните массажер в коробке в сухом прохладном месте.
Избегайте контакта с острыми предметами.
Не наматывайте провод на массажер, чтобы избежать повреждений.
Не подвешивайте и не тяните массажер за шнур.

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ПРИБОРА:

Отключите от розетки.
Снимите съемные чехлы, постирайте, верните на место после полного высыхания.
При загрязнениях на корпусе протрите мягкой слегка влажной тряпочкой.

Дать полностью высохнуть.
Если не используете массажер, храните его в сухом прохладном месте.
Избегайте попадания воды.
Не погружайте в воду.
Не используйте абразивные чистящие средства, спиртосодержащие средства и щетки, которые могут поцарапать корпус массажера.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: АВС-пластик, металл, текстиль, резина.
Цвет: черный.
Входное напряжение: 110В-220В
Мощность: 60 Вт.
Частота: 50-60 Гц.
Вес: 4.35 кг.
Комплектация: массажер – 1 шт., инструкция.