

БЕСПРОВОДНАЯ
МАССАЖНАЯ подушка
HOME STYLE



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

AMG402

GÉZATONE

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем Вас с удачной покупкой и благодарим за выбор продукции компании Gezatone!

Массаж является древнейшим приемом снятия напряжения, усталости, недомогания, стресса. Массажная подушка Gezatone, модель AMG402 незаменима для расслабления и снятия напряжения в мышцах, общего восстановления и тонизации организма. Массажная подушка Gezatone, модель AMG402 имеет эргономичный дизайн, идеально подходит для использования дома, в офисе, в автомобиле.

Использование массажной подушки в домашних условиях удобно и не требует дополнительного времени – ею можно пользоваться во время чтения или просмотра телевизора. Подушка отлично впишется в интерьер вашего дома.

Массажная подушка расслабляет мышцы шеи, плеч и спины. Функция массажа стимулирует приток крови к голове, что снимает чувство усталости и склонность ко сну, бодрит и поднимает тонус. Легко приводимая в действие массажная подушка с автоматической сменой движения роликов в течение 15-минутного цикла работы устранил дискомфортные ощущения в области шеи и расслабит шейные мышцы.

ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА

кнопка включения
/отключения обогрева

кнопка вкл/выкл
/переключения
скорости вращения
роликов

разъем зарядки
аккумулятора

массажные ролики

USB кабель
для зарядки
аккумулятора



ФУНКЦИИ МАССАЖНОЙ ПОДУШКИ



ИНФРАКРАСНЫЙ
ПРОГРЕВ



3 СКОРОСТИ
МАССАЖА




ВСТРОЕННЫЙ
ТАЙМЕР
НА 15 МИНУТ



РАБОТАЕТ
ОТ
АККУМУЛЯТОРА


4 встроенных массажных ролика в сочетании с ИК - излучением обеспечивают массаж глубоких тканей, эффективно снимают мышечное напряжение, усталость, улучшают микроциркуляцию, снимают синдром затекшей шеи, дарят Вам несравнимые моменты расслабления.

МАССАЖ ШЕИ

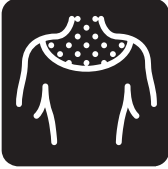

Расположитесь в кресле так, чтобы массажер плотно прилегал к области Вашей шеи. Легкий массаж способствует улучшению микроциркуляции шейного и прилегающих отделов, ускоряет метаболические процессы, снимает спазм мышц, расслабляет напряженные мышцы шеи. Регулярное использование массажной подушки способствует улучшению локальной микроциркуляции, в результате чего происходит снятие усталости и стресса.

МАССАЖ СПИНЫ И ПОЯСНИЦЫ

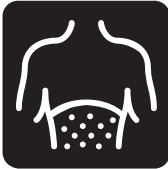

Убедитесь, что массажная подушка плотно прилегает к области спины и поясницы. Разминающие движения помогают улучшить микроциркуляцию, в результате чего снимаются боли в спине и пояснице. Регулярное использование массажной подушки значительно улучшает локальное кровообращение, позволяет снять усталость, уменьшить боли в пояснице.

ПРИМЕНЕНИЕ МАССАЖНОЙ ПОДУШКИ

ОФИСНЫЕ РАБОТНИКИ/СТУДЕНТЫ

Длительное использование компьютера ведет к отеку мышц.

ВОДИТЕЛИ

Высокая нагрузка на плечи в связи с долгим вождением.

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ

Слабость мышц и боли в спине.

ВЫПОЛНЕНИЕ МАССАЖА



кнопка включения
/отключения обогрева
кнопка вкл/выкл
/переключения
скорости вращения
роликов

1. Перед первым включением необходимо полностью зарядить аккумулятор прибора. Общее время зарядки составляет примерно 4,5-5 часа. Для зарядки встроенного аккумулятора подсоедините USB кабель Type C к разъему подушки и к зарядному устройству 5В с допустимым током нагрузки не менее 2А (в комплект не входит).
2. Нажмите и удерживайте 2-3 сек кнопку питания для включения подушки.

Внимание! 1. Во избежание попадания ткани чехла под массажные ролики убедитесь, что во время массажа подушка целиком опирается на ровную поверхность и не изогнута. **2.** Запрещается вставать и садиться на массажную подушку.

Управление массажной подушкой

1. После включения прибора по умолчанию включена средняя скорость вращения массажных роликов, направление вращения меняется автоматически каждую минуту.
2. Повторное и последующее кратковременные нажатия на кнопку питания меняет скорость вращения роликов, подсветка кнопки питания при этом начинает моргать зеленым светом. Когда выбрана скорость по умолчанию - подсветка кнопки горит постоянно. Скорость вращения последовательно меняется кратковременным нажатием на кнопку вкл/выкл/выбора скорости, всего можно выбрать 3 скорости вращения. При включении прибора по умолчанию выбрана средняя скорость вращения.
3. Нажмите на кнопку подогрева, чтобы включить подогрев, подсветка кнопки при этом будет гореть красным светом. Следующее нажатие на кнопку отключает подогрев, подсветка кнопки гаснет.

Прибор автоматически отключается через 15 минут работы. Вы можете отключить прибор в любой момент проведения процедуры, нажав и удерживая кнопку питания 2-3 сек. После автоматического отключения подушки нужно подождать как минимум 30 мин до проведения следующей процедуры во избежание перегрева.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- во время беременности
- при наличии повреждений и заболеваний кожи, ожогов в месте воздействия
- после приема успокоительных, болеутоляющих и снотворных средств, а также алкоголя
- при диабете и люди, использующие кардиостимуляторы, должны получить разрешение врача на использование данного аппарата

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом использования массажера и сохраните ее на будущее!

Во избежание риска поражения электрическим током соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Всегда отключайте сетевой адаптер из розетки после зарядки аккумулятора.
- Запрещается использование аппарата в помещении бассейна или душевой комнаты.
- Не располагайте аппарат или любую из его частей в местах, где есть риск их падения в воду.
- Не касайтесь и не пытайтесь извлечь упавший в воду аппарат до отключения зарядного устройства из розетки.
- Запрещается любое дальнейшее использование аппарата, если произошло проникновение воды внутрь массажной подушки, корпуса сетевого адаптера.
- Берегите аппарат и соединительные провода от соприкосновения с нагретыми поверхностями.
- Запрещается использовать во время сна. Избегайте ситуаций, когда Вы можете заснуть во время использования аппарата. Например, после приема успокоительных или снотворных препаратов, алкоголя.
- Если Вы страдаете каким-либо заболеванием, не упомянутым в разделе «Противопоказания», перед использованием массажной подушки проконсультируйтесь с врачом.

Используйте аппарат только по его прямому назначению и строго в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Обязательно отключайте аппарат от сети и давайте ему остыть перед проведением обслуживания и чистки.
2. Теканевую поверхность массажной подушки следует очищать мягкой, слегка влажной тканью или мягкой щеткой. Никогда не погружайте массажную подушку в жидкость и не позволяйте намокать.
3. Наружный чехол подушки можно снять для дальнейшей ручной чистки. Внимание! При надевании чехла убедитесь что наладка кнопок управления на чехле совпадает с расположением самих кнопок на внутренней поверхности подушки.
4. Не сушите массажную подушку на солнце или рядом с нагревательными приборами.
5. Запрещается подвергать массажную подушку сухой химчистке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания:

сетевой адаптер DC 5В, 2А (в комплект не входит)

Вид аккумулятора: литий - ионный, 3x3,7В 2000 мАч

Продолжительность непрерывной работы: 15 минут

Диапазон допустимых температур воздуха: 5°C - 40°C

Допустимый уровень влажности воздуха: < 80%

Материал наполнителя: искусственный латекс.

Материал чехла: полиэстер, лён

Размеры в упаковке: 410x220x150 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Массажная подушка – 1 шт.

USB кабель Type C - Type A, 0.5м - 1 шт.

Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

GÉZATONE

**ПРИБОР ДЛЯ УХОДА И МАССАЖА ЗА ТЕЛОМ,
СЕРИЯ (ТИП) AMG, МОДЕЛЬ AMG402,
БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, Т. М. GEZATONE**

Изготовитель: "Gezanne I.T.C." / "Жезанн И.Т.С.", адрес: Saint Avertin
39 rue des Granges Galand, France, /Сент Авертен 39 рю де Гранж
Галан, Франция. Филиал завода-изготовителя: "GREAT CATHAY
PRODUCTS MFG. INC." / "ГРЭЙТ КЭТЭЙ ПРОДАКТС МФГ. ИНК"
адрес: 2 fl., No. 19, Lane 160, SUNG-CHIANG RD, Taipei, Taiwan
R.O.C. / 2фл. Но. 19, Лэйн 160, Санг-Чианг Рд, Тайпей, (Китай),
Тайвань. Импортер/уполномоч. изготовителем орг.: ООО
«МИТРИДАТ», РФ, Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41, стр. 1, эт. 2,
пом. I, ком 8, тел.: 8 (495) 225 25 83.
Срок службы: 3 года.

Способ применения и дату производства: см. инструкцию.

KZ. Gezatonе сауда белгісінің денеге күтім жасауға және массаж
жасауға арналған аспап серия (түрі) AMG, модель AMG402,
тұрмыстық электрлік

Дайындаушы: "Gezanne I.T.C." / "Жезанн И.Т.С.", мекенжайы:
Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, France, /Сент Авертен
39 рю де Гранж Галан, Франция. Дайындаушы зауыттың
филиалы: "GREAT CATHAY PRODUCTS MFG. INC." / "ГРЭЙТ
КЭТЭЙ ПРОДАКТС МФГ. ИНК" мекенжайы: 2 fl., No. 19, Lane
160, SUNG-CHIANG RD, Taipei, Taiwan R.O.C., / 2фл. Но.
19, Лэйн 160, Санг-Чианг Рд, Тайпей, (Қытай), Тайвань.

Импорттаушы/дайындаушының уәкілетті мекемесі:
"МИТРИДАТ" ЖШҚ, Ресей, Мәскеу қ., Алтуфьевское тас жолы,
41 үй, 1 құрыл., 2 қабат, үй-жай I, 8 бөлме, тел.: 8 (495) 225 25 83.



Дата производства: 06.2022