


Время для себя!

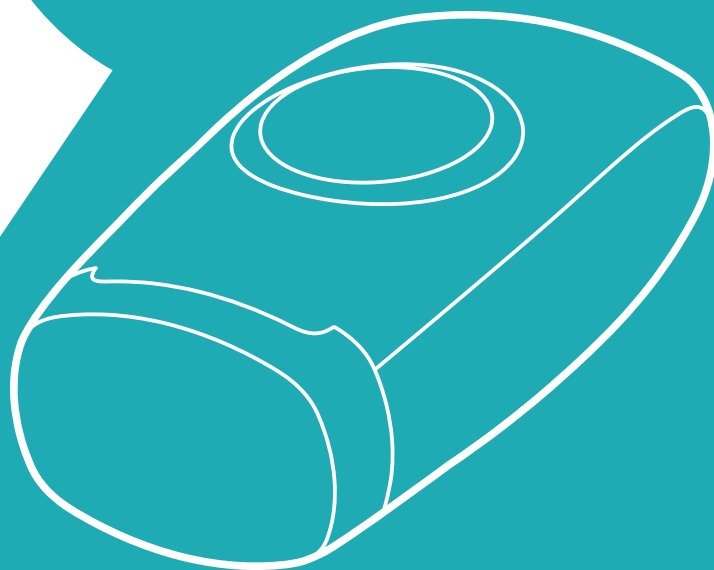

**Массажер для рук
КТ-2931**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство массажера для рук	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности	12
Другие товары Kitfort	14

Общие сведения

КТ-2931 — массажер для рук, который поможет расслабить руки в конце рабочего дня, избавиться от онемения пальцев рук, боли в суставах. Массажер подойдет тем, кто занимается длительной механической работой и подвергает руки высокой нагрузке. Регулярный массаж рук необходим офисным сотрудникам, музыкантам, писателям, домохозяйкам, людям с плохим кровообращением в руках, а также тем, кто хочет сохранить красоту своих рук.

Массажер для рук производит прессотерапию (лимфодренаж, пневмомассаж), которая направлена на стимуляцию циркуляции лимфы и крови, и точечный массаж акупунктурных точек ладони.

Точки акупунктуры на руках соединены с внутренними органами человека, поэтому КТ-2931 не только помогает снять усталость рук, но и благоприятно влияет на весь организм. Воздействие на конкретные биологически активные точки на ладонях помогает улучшить обмен веществ и нормализовать работу внутренних органов.

Шесть режимов массажа: 4 режима массажа ладони и запястья, 1 режим массажа ладони, 1 режим массажа запястья. Для каждого из режимов вы можете выбрать один из шести уровней интенсивности давления во время массажа для комфортного использования массажера. Прибор имеет автоматическое отключение после 15-минутного сеанса.

Режим подогрева эффективно улучшает микроциркуляцию рук для более глубокого массажа, делает кожу рук нежной и гладкой. Массажер имеет два режима вибрации, которые вы можете включить для лучшего расслабления перенапряженных мышц.

В комплект к устройству входит шнур для зарядки USB Type-C, с помощью которого вы можете зарядить массажер от розетки, используя адаптер, от компьютера или внешнего аккумулятора, который можно брать с собой в любое место. Время автономной работы составляет 4 часа при использовании массажера для рук без режимов «Вибрация» и «Подогрев». При использовании режимов «Вибрация» и «Подогрев» — 2 часа.

За счет небольшого веса и автономной работы массажером для рук КТ-2931 удобно пользоваться как дома, так и в офисе или путешествии.

Данное устройство не является медицинским средством и используется только в профилактических целях. Если у вас есть какие-то заболевания или противопоказания к проведению пневмотерапии, то перед использованием необходимо проконсультироваться с врачом.

Комплектация


1. Массажер для рук — 1 шт.
2. Шнур для зарядки USB Type-C — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера для рук



Панель управления

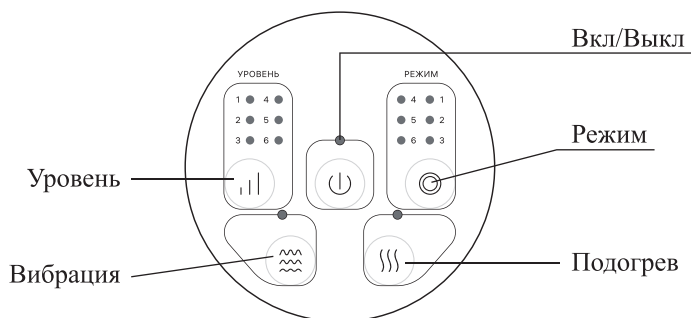

Кнопка «Вкл/Выкл» — включение и выключение массажера для рук. Нажмите на кнопку, индикатор загорится красным — массажер для рук готов к работе.

Кнопка «Режим» — выбор режима работы массажера. Однократное нажатие на кнопку переключит массажер на следующий режим. Переключение происходит циклически, т.е. после выбора 6 режима нажмите на кнопку еще раз, чтобы переключить на 1 режим. По умолчанию задан режим 1.

Кнопка «Уровень» — выбор уровня интенсивности давления во время массажа. Однократное нажатие на кнопку переключит массажер на следующий уровень интенсивности. Переключение происходит циклически, т.е. после выбора 6 уровня нажмите на кнопку еще раз, чтобы переключить на 1 уровень. Уровень 1 — самый слабый, 6 — самый сильный. По умолчанию задан уровень 3.

Кнопка «Вибрация» — включение/выключение и выбор режима вибрации. При одном нажатии включается импульсная вибрация, индикатор горит красным. При повторном нажатии включается непрерывная вибрация, индикатор горит зеленым. После третьего нажатия вибрация отключается.

Кнопка «Подогрев» — включение/выключение подогрева. Нажмите один раз для включения подогрева, индикатор загорится красным. Нажмите повторно, чтобы отключить подогрев, индикатор погаснет. Температура подогрева: 42 °С.

Нажатие кнопок сопровождается звуковым сигналом.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте массажер для рук. Протрите корпус сначала влажной мягкой тканью, затем сухой.

Перед первым использованием зарядите массажер полностью, как описано в разделе «Зарядка аккумулятора». Это продлит срок службы аккумулятора.

Зарядка аккумулятора

Зарядка осуществляется от шнура USB-C. Разъем для зарядки находится на правой стороне массажера.



Разъем подключения шнура для зарядки

Шнур для зарядки USB-C

Подсоедините шнур к массажеру, затем к источнику питания. Для зарядки устройства используйте блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: $\text{---}5 \text{ В}, 1 \text{ А}$.

Так же вы можете заряжать устройство через компьютер или внешний аккумулятор. При подключении к зарядному устройству массажер подаст звуковой сигнал. Индикатор, находящийся над кнопкой «Вкл/Выкл», начнет мигать, показывая, что устройство заряжается. После завершения зарядки индикатор погаснет, устройство подаст звуковой сигнал. Время полной зарядки — 6 часов. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от массажера. Время автономной работы массажера без режимов «Вибрация» и «Подогрев» — 4 часа. При использовании режимов «Вибрация» и «Подогрев» — 2 часа.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните массажер для рук при комнатной температуре. Если массажер не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора.

Примечание. В целях безопасности во время зарядки массажер не работает.

Использование

1. Расположите руку в устройстве так, чтобы в ладони находилась выпуклая часть массажера. Расслабьте руку.

Внимание! Перед использованием прибора снимите все аксессуары с руки (кольца, часы, браслеты).

2. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», индикатор над кнопкой загорится красным — массажер для рук готов к работе.
3. Нажмите на кнопку «Режим», чтобы выбрать один из 6 режимов. По умолчанию — режим 1. Однократно нажимайте на кнопку для последовательного переключения режимов. Вы можете менять режим во время сеанса массажа.
 - Режим 1: Циклическое чередование массажа ладони, запястья, ладони и запястья одновременно, попеременное усиление давления на ладонь и запястье во время массажа ладони и запястья одновременно.
 - Режим 2: Циклическое чередование массажа ладони, запястья, ладони и запястья одновременно.
 - Режим 3: Массаж ладони и запястья одновременно.
 - Режим 4: Массаж запястья.
 - Режим 5: Чередование массажа ладони и запястья.
 - Режим 6: Массаж ладони.

Внимание! Не пытайтесь вынуть руку из работающего массажера, это может повредить прибор.

Примечание. Ощущение покалывания является нормальным во время любого вида массажа.

4. Нажмите на кнопку «**Уровень**», чтобы выбрать подходящий уровень интенсивности давления во время массажа. По умолчанию — уровень 3. Однократно нажимайте на кнопку для последовательного переключения уровней интенсивности. Уровень 1 — самый слабый, 6 — самый сильный. Вы можете менять уровень интенсивности во время сеанса массажа.

Примечание. Рекомендуется начинать массаж с самой слабой интенсивности, постепенно повышая ее, чтобы найти идеальные для вас условия массажа.

5. Вы можете включить вибрацию во время массажа с помощью кнопки «**Вибрация**». Первый режим вибрации — импульсная вибрация. Второй режим вибрации — непрерывная вибрация.
6. Вы можете включить подогрев во время массажа с помощью кнопки «**Подогрев**». Температура подогрева — 42 °С.

Примечание. Подогрев осуществляется по внешней стороне ладони. Процесс нагрева происходит постепенно. Потребуется около 5 минут, прежде чем вы почувствуете заметное повышение температуры.

7. Выключение: массажер оснащен автоотключением после 15 минут массажа, так же вы можете нажать на кнопку «**Вкл/Выкл**», чтобы выключить массажер в любое время.

Внимание! Не пытайтесь вынуть руку из массажера сразу после завершения сеанса, это может повредить прибор. Дождитесь спуска воздуха, чтобы беспрепятственно достать руку.

Примечание. Не нужно беспокоиться о следах на руках после массажа, они исчезнут в течение 1 часа.

8. После автоотключения вы можете нажать на кнопку «**Вкл/Выкл**» для включения массажера, если хотите продолжить использование.

Внимание! Не используйте массажер более 30 минут на одну руку. Это может привести к повреждению кожи.

Примечание. После 30 минут использования массажера сделайте перерыв в работе устройства на 30 минут.

Меры предосторожности по применению

1. Перед применением желательно проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
3. Существует ряд противопоказаний к применению, таких как:
 - подозрение на злокачественные опухоли;
 - инфекционные и грибковые заболевания кожи;
 - острые суставные боли воспалительного характера;
 - псориаз или атопический дерматит на руках и запястьях;

- наличие электронных устройств, при заболевании сердца, например кардиостимулятор;
 - протезы из металла в зоне воздействия;
 - повышенная температура;
 - сахарный диабет.
4. Пользоваться с осторожностью при:
 - беременности;
 - наличии ран или каких-либо заболеваний в острой форме;
 - нечувствительности к теплу;
 - чувствительной коже.
 5. Детям до 12 лет разрешается пользоваться устройством в присутствии взрослых.
 6. Не используйте массажер во время управления транспортным средством.
 7. Не используйте массажер более 30 минут на одну руку, это может привести к повреждению кожи.

Советы

1. Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, понизьте уровень интенсивности массажера.
2. Для более глубокого ухода за кожей рук нанесите крем, наденьте одноразовые полиэтиленовые перчатки и проведите сеанс массажа.
3. Используя одноразовые полиэтиленовые перчатки, вы сможете содержать в чистоте тканевый чехол массажера.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус слегка влажной, затем сухой тканью. Не допускайте попадания воды внутрь массажера.

Перед использованием массажера убедитесь, что руки чистые или используйте одноразовые целлофановые перчатки. Необходимо поддерживать чистоту тканевого чехла массажера, т. к. он является несъемным, его стирка невозможна.

Уход и хранение

Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. В случае если массажер не используется в течение долгого времени, поместите его в коробку или пакет для защиты от пыли.

Аккумулятор массажера для рук литий-ионный, поэтому нужно хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Рекомендуем зарядить устройство в течение 3 часов. Таким образом, устройство будет заряжено примерно наполовину. Храните прибор при комнатной температуре.

При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Устранение неполадок

Массажер не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Недостаточный уровень заряда аккумулятора	Зарядите аккумулятор согласно разделу «Зарядка аккумулятора»

Массажер не заряжается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания
Поврежден шнур для зарядки	Замените шнур для зарядки

Массажер не работает, над кнопкой «Вкл/Выкл» горит индикатор

Возможная причина	Решение
Массажер заряжается. В целях безопасности во время зарядки прибор не работает	Дождитесь окончания зарядки аккумулятора. Отключите массажер от зарядного устройства, после чего проведите сеанс массажа

Мигают все индикаторы, массажер подает звуковой сигнал и выключается

Возможная причина	Решение
Недостаточный уровень заряда аккумулятора	Зарядите аккумулятор согласно разделу «Зарядка аккумулятора»

Массажер издает звуки при работе

Возможная причина	Решение
Работает воздушный насос	Этот звук не является неисправностью. Он сопровождает работу устройства
Включен режим «Вибрация»	

Массажер нагрелся

Возможная причина	Решение
Вы провели несколько сеансов подряд	Выключите массажер и дайте ему остыть в течение 30 минут. Не пользуйтесь массажером дольше 30 минут

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB \approx 5 В, 1 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 2,5 А*ч (9,25 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Время работы от аккумулятора: 2–4 ч
6. Время зарядки: 6 ч
7. Длина шнура: 1,1 м
8. Размер устройства: 300 × 160 × 120 мм
9. Размер упаковки: 335 × 152 × 195 мм
10. Вес нетто: 1,0 кг
11. Вес брутто: 1,3 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания воды внутрь корпуса устройства не считается гарантийным случаем.

Выход из строя аккумулятора вследствие неправильной зарядки аккумулятора или несоблюдения рекомендаций по длительному хранению не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте массажер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к блоку питания или другому источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

5. Не переносите массажер, взявшись за шнур зарядки.
6. Не используйте устройство, если шнур для зарядки или другие части массажера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с массажером.
8. Контролируйте работу массажера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
10. Не допускайте падения массажера и не подвергайте его ударам.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
13. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
14. Держите массажер вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
15. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
16. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от массажера.
17. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм

IM-2

Другие товары Kitfort



Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт

Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл

Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87